## COMO PLEGAR LA SILLA



Retirar el soporte para cabeza



Abatir el descansapies



Bajar el soporte haciendo presión a la barra roja



Abatir ambos descansa brazos



Halar la barra roja de pliegue



Agarrar la parte superior de la silla y doblar hacia adentro para plegarla completamente

## ¿COMO CARGAR LA SILLA?

CARGADOR TIPO MICROFONO: Conecte el cargador a un tomacorriente de 110 Voltios, al puerto tipo microfono que está bajo las baterías, si en el lugar que usted se encuentra hay desniveles de luz, es necesario utilizar un regulador de voltaje para evitar algun tipo de daño.



Conectar en el puerto con toma de 3 clavijas directamente a la bateria

## MANTENIMIENTO DE LA SILLA

Haga revisar su silla mínimo una vez al año con personal técnico especializado y aprobado por BIGMOTION para que pueda funcionar de forma segura.

Limpieza de la silla de ruedas y tapizado

Pruebe y verifique los frenos manuales que están en cada llanta

Verificar el nivel de indicador de batería y de ser necesario proceda a cargarla

Verificación del terminal de la batería - limpie si hay corrosión y aplique limpiador de contactos

Verifique el desgaste del cinturón de seguridad y compruebe que la hebilla abrocha perfectamente

Las verificaciones exhaustivas, pruebas de seguridad y mantenimiento deben llevarse a cabo por parte del personal calificado

### LIMPIEZA

Una vez a la semana debe limpiar la silla con un paño ligeramente humedecido, o emplear una aspiradora para eliminar la pelusa o el polvo que haya podido acumularse en la silla

### REPARACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS


Se recomienda que cualquier reparación sea realizada por personal técnico BigMotion, si usted decide realizar las reparaciones o modificaciones por su cuenta, la garantía se perderá.

BIG MOTION

## ENCENDER LA SILLA




Para el funcionamiento de la silla se precisa encender el sistema como primer paso del interruptor rojo que queda bajo las baterias en la parte inferior de la silla

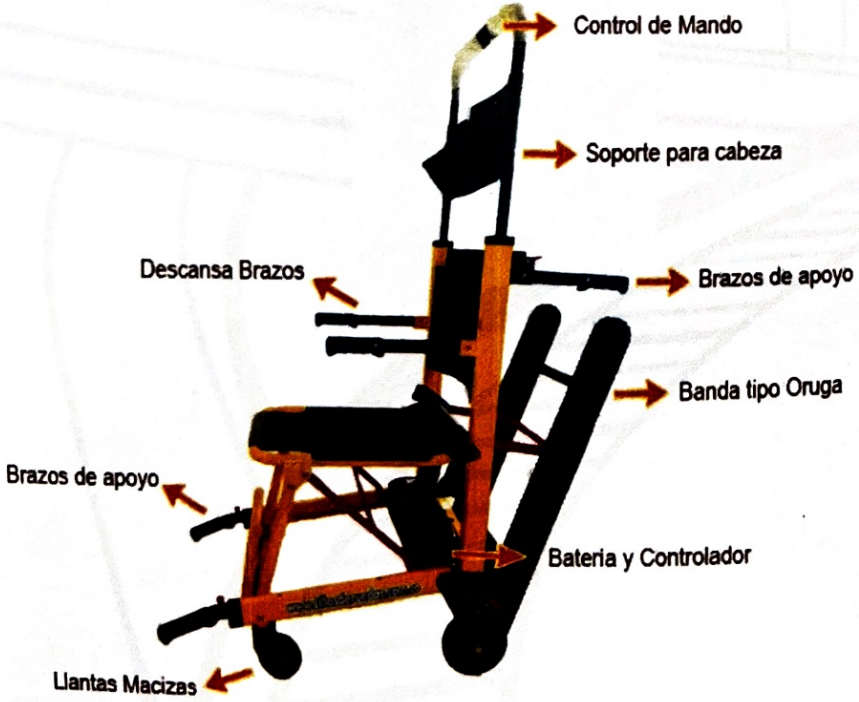


## PARTES DEL CONTROL DE MANDO




## ACCIONAR BANDA ORUGA

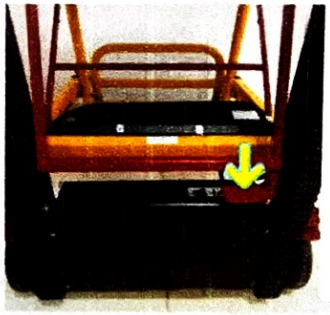



Oprimir el pedar rojo como se muestra en la foto para abrir automaticamente las bandas tipo oruga, para volver a ponerlas en su posición bajar completamente la barra roja hasta que quede ajustada.

## CUIDADOS IMPORTANTES CON EL CONTROL DE MANDO

Este dispositivo regula la electricidad y velocidad de la silla.

No manipular de forma brusca, no requiere de fuerza para ser manipulada.

No dejar caer ni apoyarse en el, al subirse o bajarse de la silla.



## SEGURIDAD

### ANTES DE USAR SU SILLA, POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL

En cualquier vehiculo impulsado a motor, la seguridad es muy importante. Encuentre sugerencias de utilidad que le ayudarán a utilizar esta silla de ruedas de forma segura.

- Antes de intentar subirse o bajarse de la silla, asegúrese que está apagada
- Asegúrese siempre de que es capaz de accionar todos los controles desde una posición cómoda. Una buena postura resulta esencial para garantizar su comodidad y bienestar.
- No descienda un desnivel hacia atrás.
- No utilice la silla para fines no descritos, podría generarle lesiones
- Evite que la silla se ponga en movimiento de forma involuntaria podría generar lesiones
- No intente efectuar giros bruscamente, la silla de ruedas podría volcarse
- Compruebe que las conexiones eléctricas están bien conectadas
- Compruebe la carga de las baterías
- No exceda el peso máximo autorizado
- Evite las detenciones y los arranques bruscos
- Por motivos de seguridad y para prevenir los accidentes, que resulten del desgaste no detectado con tiempo, es importante someter el dispositivo eléctrico a una inspección rutinaria bajo condiciones de servicios normales
- La silla está diseñada para el transporte de una sola persona, NUNCA la utilice para transportar más de una persona
- Compruebe que el espacio en el que va a usar la silla sea el adecuado segun asesoria previa
- Siempre usar los cinturones que trae la silla cuando esta esté en funcionamiento
- Cuando utilice el control de mando sea cuidadoso
- No permita que personal inexperto repare su silla.

## CUIDADOS PARA LAS BATERIAS



1. Utilice sólo un cargador aprobado por BIGMOTION y compatible con su silla.

2. Su silla debe tener una carga inicial, úsela hasta que la carga esté sobre el 20% - 30% y cargue nuevamente.

3. Las dos primeras cargas deben ser de 12 horas para curar las baterías.

4. Si en el lugar que usted se encuentra hay muchas fluctuaciones de luz, use un estabilizador de voltaje, para evitar que estas alteraciones afecten su silla.

5. Si no va a utilizar la silla, es recomendable que la deje totalmente cargada antes de guardarla, de lo contrario es posible que al intentar prenderla sus baterías ya esten dañadas.

6. Si deja de utilizar la silla durante un período de tiempo prolongado (más de 15 días), desconecte la batería.

7. Si no tiene en cuenta la recarga de las baterías, estas pueden verse dañadas, y derivar en una menor autonomía y/o fallos prematuros.

Si sigue todos los puntos anteriores, mejorará el estado de las baterías, éstas tendrán una vida útil más prolongada y la silla tendrá un alcance mayor.

## CONDICIONES DE GARANTIA PARA BATERÍAS

**La garantía NO aplica:**

1. CUANDO ESTE INFLADA O PRESENTE BAJO VOLTAJE, YA QUE FUE SOMETIDA A UNA SOBRE CORRIENTE, SOBRE VOLTAJE Y/O SOBRE DESCARGA.

2. CUANDO SE ENCUENTRE DEFORME EN SU ESTADO FISICO (GOLPEADAS, ROTAS O EN SUS BORDES QUEMADOS).

3. CUANDO SE USE LA BATERIA EN UN CONJUNTO DE BATERIAS DE REFERENCIAS O MARCAS DIFERENTES (MALA CONFIGURACION DE BANCOS DE BATERIAS).

4. CUANDO SEA SOMETIDA A CORTO CIRCUITO ENTRE SUS BORDES O TERMINALES.

5. NO SE CONSIDERAN DENTRO DE LOS TERMINOS DE GARANTIA, LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL MAL USO DEL EQUIPO Y CASOS FORTUITOS COMO (TERREMOTOS, ASONADAS, ROBOS, DESCARGAS ATMOSFERICAS), ES DECIR TODO LO QUE NO TENGA RELACION DIRECTA CON EL NORMAL USO DEL EQUIPO.

6. CUANDO NO SE CUENTE CON LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA LA PRESERVACION Y BUEN ESTADO DE LA BATERIA SEGÚN SU FICHA TECNICA (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETC).

7. CUANDO SE RETIRE LA SERIE DE LA BATERIA.

8. CUANDO SU APLICACIÓN SEA DIFERENTE A LAS ESTIPULADAS PARA ESTAS BATERIAS.

9. CUANDO SE UTILICEN EN DISPOSITIVOS QUE NO TIENEN CONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE SEGÚN LA FICHA TECNICA DE LA BATERIA.

10. CUANDO SE VENCE EL TIEMPO DE LA GARANTIA OFRECIDA.

11. CUANDO NO SE HAGA EL PROCESO DE CARGA EN UN PERIODO SUPERIOR A UN MES.

12. LA GARANTIA DE LA BATERIA NO APLICA CUANDO CON UN ELEMENTO DE MEDICION (MULTIMETRO) REGISTRE UN VOLTAJE SUPERIOR A 24VOLTIOS.

13. SI LA SILLA O SCOOTER FUNCIONA A TRAVÉS DE BATERIAS DE LITIO RECUERDE CONSULTAR ANTES DE VIAJAR CON SU AEROLINEA, NO SE DARA GARANTIA NI SE HARAN DEVOLUCIUONES POR RESTRICCION QUE APLIQUE A ESTE TIPO DE BATERIAS A LA HORA DE VIAJAR.

14. CUANDO NO SE TENGA EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES ENTREGADAS.

15. REALICE UNA CARGA INICIAL DE 12 HORAS Y UTILICE, DESPUÉS DE DESCARGADA VUELVA Y REALICE CARGA DE 12 HORAS, POSTERIORMENTE GUÍESE DEL INDICADOR DEL CARGADOR. TENGA EN CUENTA QUE LA AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS DESCRITA EN EL MANUAL DE USO Y FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE UN PUNTO DE REFERENCIA. ESTE PUEDE VARIAR SEGÚN: VELOCIDAD EN LA CUAL ACTIVE EL CONTROL DE MANDO, INCLINACIÓN DEL TERRENO, PESO QUE ESTÁ SOPORTANDO, ACTIVACIÓN DE COMANDOS ADICIONALES COMO SISTEMA DE LUCES, NIVEL DE CARGA EN EL CUAL SE ENCUENTRE, CONSUMO EXCESIVO DE LOS MOTORES POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y CARGAS INTERRUMPIDAS.

BIG MOTION

# MANUAL DE USO

## SALVAESCALERA Eléctrica

BIG MOTION






Invima CCAA

La imagen es de uso únicamente ilustrativo e informativo. Algunos colores / ambientes pueden no estar disponibles o no corresponder al producto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura**<br>*Aluminio Plegable* | **Capacidad de Peso**<br>*100 kg Aprox* | **Batería**<br>*Litio 24V 10AH* | **Motor**<br>*160W* | **Peso Neto**<br>*33.6 kg Aprox* | **Sillín**<br>*Ancho 42cm Prof. 48cm* |
| **Largo**<br>*102cm Aprox Plegada 126cm Aprox* | **Ancho**<br>*49cm Aprox Plegada 28cm Aprox* | **Alto**<br>*128cm Aprox Plegada 49cm Aprox* | **Altura del asiento al piso**<br>*52cm Aprox* | **Altura Espaldar**<br>*65cm Aprox Fijo* | **Descansabrazos**<br>*Altura 27cm Abatibles* |
| **Llantas Delanteras**<br>*Macizas 5'* | **Llantas Traseras**<br>*Macizas 6'* | **Descansapies**<br>*Bandeja Abatible* | **Freno Manual**<br>*En Llantas Traseras* | **Accesorios**<br>*Cinturón de Seguridad* | **Sistema**<br>*Luces* |

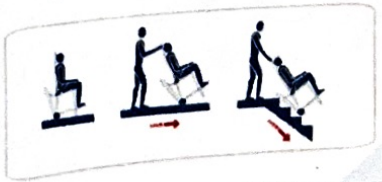

| | | |
|---|---|---|
| **Cargador**<br>*24V 5AH A Micrófono* | **Embalaje**<br>*Largo: 117cm Ancho: 30cm Alto: 58cm Peso: 38,4kg* | **Garantía**<br>- Estructura, motores, parte eléctrica: 12 meses<br>- Control y Batería: 6 meses<br>- Cargador: 3 meses<br>- Partes Plásticas: No aplica |

ANTES DE VIAJAR CONSULTE CON SU AEROLINEA Y ASEGURESE DE QUE EL TIPO DE BATERIAS QUE ESTA UTILIZANDO NO TIENEN NINGUNA RESTRICCION YA QUE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN CASO DADO.

## CONDICIONES DE GARANTIA PARA BATERIAS

### GARANTIA DE 6 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA BATERIAS DE LITIO, BATERIAS EN GEL O SECAS.

LA GARANTIA NO APLICA:

1. CUANDO ESTE INFLADA O PRESENTE BAJO VOLTAJE, YA QUE FUE SOMETIDA A UNA SOBRE CORRIENTE, SOBRE VOLTAJE Y/O SOBRE DESCARGA.
2. CUANDO SE ENCUENTRE DEFORME EN SU ESTADO FÍSICO (GOLPEADAS, ROTAS O EN SUS BORDES QUEMADOS).
3. CUANDO SE USE LA BATERÍA EN UN CONJUNTO DE BATERÍAS DE REFERENCIAS O MARCAS DIFERENTES (MALA CONFIGURACIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS).
4. CUANDO SEA SOMETIDA A CORTO CIRCUITO ENTRE SUS BORNES O TERMINALES.
5. NO SE CONSIDERAN DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA, LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL MAL USO DEL EQUIPO Y CASOS FORTUITOS COMO (TERREMOTOS, ASONADAS, ROBOS, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS), ES DECIR TODO LO QUE NO TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL NORMAL USO DEL EQUIPO.
6. CUANDO NO SE CUENTE CON LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA LA PRESERVACIÓN Y BUEN ESTADO DE LA BATERÍA SEGÚN SU FICHA TÉCNICA (TEMPERATURA, HUMEDAD, ETC.).
7. CUANDO SE RETIRE LA SERIE DE LA BATERÍA
8. CUANDO SU APLICACIÓN SEA DIFERENTE A LAS ESTIPULADAS PARA ESTAS BATERÍAS.
9. CUANDO SE UTILICEN EN DISPOSITIVOS QUE NO TIENEN CONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DE LA BATERÍA.
10. CUANDO SE VENCE EL TIEMPO DE LA GARANTÍA OFRECIDA.
11. CUANDO NO SE HAGA EL PROCESO CARGA EN UN PERIODO SUPERIOR A 15 DÍAS.
12. LA GARANTÍA DE LA BATERÍA NO APLICA CUANDO CON UN ELEMENTO DE MEDICIÓN (MULTÍMETRO) REGISTRE UN VOLTAJE MENOR A 24VOLTIOS.
13. SI LA SILLA O SCOOTER FUNCIONA ATRAVESÓ DE BATERÍAS DE LITIO RECUERDE CONSULTAR ANTES DE VIAJAR CON SU AEROLÍNEA, NO SE DARÁ GARANTÍA NI SE HARÁN DEVOLUCIONES POR RESTRICCIÓN QUE APLIQUE A ESTE TIPO DE BATERÍAS A LA HORA DE VIAJAR.
14. CUANDO NO SE TENGA EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES ENTREGADAS.
15. REALICE UNA CARGA INICIAL DE 12 HORAS Y UTILICE, DESPUÉS DE DESCARGADA VUELVA Y REALICE CARGA DE 12 HORAS, POSTERIORMENTE GUÍESE DEL INDICADOR DEL CARGADOR. TENGA EN CUENTA QUE LA AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS DESCRITA EN EL MANUAL DE USO Y FICHA TÉCNICA ES ÚNICAMENTE UN PUNTO DE REFERENCIA. ESTE PUEDE VARIAR SEGÚN: VELOCIDAD EN LA CUAL ACTIVE EL CONTROL DE MANDO, INCLINACIÓN DEL TERRENO, PESO QUE ESTÁ SOPORTANDO, ACTIVACIÓN DE COMANDOS ADICIONALES COMO SISTEMA DE LUCES, NIVEL DE CARGA EN EL CUAL SE ENCUENTRE, CONSUMO EXCESIVO DE LOS MOTORES POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y CARGAS INTERRUMPIDAS.

**NOTA: EL CLIENTE FIRMA ESTE DOCUMENTO A CONFORMIDAD, ACEPTANDO LAS CONDICIONES DE GARANTIA SOBRE BATERIAS.**

FIRMA DEL CLIENTE: _____

## CUIDADOS PARA LAS BATERIAS

1. UTILICE SOLO UN CARGADOR APROBADO POR BIGMOTION Y COMPATIBLE CON SU SILLA.
2. LAS PRIMERAS DOS CARGAS DEBEN SER DE 12 HORAS PARA RESTABLECER LA SEDIMENTACIÓN DE LAS BATERÍAS.
3. SI EN EL LUGAR QUE USTED SE ENCUENTRA HAY MUCHOS DESNIVELES DE LUZ, USE UN ESTABILIZADOR DE PICOS, PARA EVITAR QUE ESTAS ALTERACIONES AFECTEN LAS BATERÍAS.
4. NO INTERRUMPA EL CICLO DE CARGA, ES DECIR, NO DESCONECTE LA BATERÍA SOLO HASTA QUE EL INDICADOR DEL CARGADOR PASE A VERDE.
5. SI NO VA A UTILIZAR LA SILLA, ES RECOMENDABLE QUE LA DEJE TOTALMENTE CARGADA ANTES DE GUARDARLA Y QUE ESTÉ DESCONECTADA, DE LO CONTRARIO ES POSIBLE QUE AL INTENTAR PRENDERLA SUS BATERÍAS YA ESTÉN DAÑADAS. ESTE PERIODO NO DEBE SER MAYOR A 15 DÍAS.
6. SI NO TIENE EN CUENTA LOS CICLOS DE CARGA DE LAS BATERÍAS, ESTAS SE DAÑARÁN, Y DERIVAR EN UNA MENOR AUTONOMÍA Y/O FALLOS PREMATUROS.
7. NO DEJE DESCARGAR LAS BATERÍAS POR COMPLETO, ES NECESARIO PONER A CARGARLAS CUANDO EL INDICADOR DEL JOYSTICK MUESTRE LUZ ROJA Y UNA AMARILLA ENCENDIDA, EL RESTO APAGADAS.

**NOTA: ACEPTO QUE HE LEIDO Y APROBADO LOS CUIDADOS PARA LAS BATERÍAS.**

FIRMA DEL CLIENTE

_____

BIGMOTION
Sillas de ruedas eléctricas

## POLÍTICAS DE GARANTÍA

## SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS Y / O SCOOTER

PARA QUE DISFRUTE CORRECTAMENTE DEL PRODUCTO ADQUIRIDO EN BIGMOTION, LE RECOMENDAMOS EN PRIMERA MEDIDA LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO, DONDE ESTÁ ESTIPULADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
2. CARACTERÍSTICAS.
3. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD .
4. CUIDADOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA PARA LAS BATERÍAS.
5. INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.
6. MANTENIMIENTO DE LA SILLA.
7. CÓDIGOS DE ERROR GENERADOS.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS PARA APLICAR A LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA:

- EL CLIENTE DEBE ENVIAR EL PRODUCTO A NUESTRAS OFICINAS O BODEGA EN BOGOTÁ.
- EL TIEMPO DE REVISIÓN ES DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES Y SE DICTAMINARA SI SE HACE EFECTIVA O NO LA GARANTÍA.
- RECUERDE QUE EL PRODUCTO PIERDE GARANTÍA SI ES MANIPULADO POR TERCEROS O PERSONAS NO AUTORIZADAS POR BIGMOTION.
- SI EL PRODUCTO PRESENTA HUMEDAD EN SU PARTE ELÉCTRICA NO TENDRÁ GARANTÍA, AL IGUAL QUE GOLPES O MAL USO EN GENERAL.
- SI SE ENCUENTRA EN UNA CIUDAD DIFERENTE A BOGOTÁ, TENGA EN CUENTA QUE DEBE ASUMIR EL COSTO DE ENVIÓ DEL PRODUCTO O EN SU DEFECTO DE LA PARTE QUE ESTÁ PRESENTANDO EL INCONVENIENTE, TAL COMO: BATERÍAS O CARGADOR. (ANTES DE ENVIAR EL PRODUCTO, DEBE CONTACTAR A SERVICIO TÉCNICO PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES).
- SI SU SILLA PRESENTA PROBLEMAS DIRECTAMENTE CON EL JOYSTICK/CONTROL DE MANDO O MOTORES, DEBE CONTACTAR A SERVICIO TÉCNICO AL NÚMERO 350 2155644 PARA QUE LE INDIQUE LOS PASOS A SEGUIR.
- SI EL SERVICIO TÉCNICO ASÍ LO ESTIPULA, SE RECOMIENDA ENVIAR EL PRODUCTO COMPLETO; EN ESTE CASO LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA Y /O SCOOTER, PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA DIRECTAMENTE EN NUESTRAS OFICINAS. EN CASO CONTRARIO, **BIGMOTION NO SE HACE RESPONSABLE DE LA GARANTÍA DEL REPUESTO POR EL MAL MANEJO QUE SE LE PUEDA DAR A NUESTRO PRODUCTO.**

NO OLVIDE: PARA PRESENTAR UN RECLAMO SOBRE NUESTROS PRODUCTOS DEBE DIRIGIRSE DIRECTAMENTE EL TITULAR DE LA FACTURA CON SU ORIGINAL, EN CASO DE QUE NO PUEDA DIRIGIRSE DIRECTAMENTE EL TITULAR A NUESTRAS INSTALACIONES, PUEDE PRESENTARSE OTRA PERSONA CON UNA CARTA AUTORIZADA, CON COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL TITULAR DE LA FACTURA. TENGA EN CUENTA EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA REVISIÓN DEL PRODUCTO.

NOTA: ACEPTO QUE HE LEÍDO Y APROBADO LAS POLÍTICAS DE GARANTÍA.

FIRMA APROBADO _____

BIG MOTION
Sillas de ruedas eléctricas

## POLÍTICAS DE GARANTÍA CARGADOR

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS PARA APLICAR A LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA:

- EL CLIENTE DEBE ENVIAR EL PRODUCTO A NUESTRAS OFICINAS O BODEGA EN BOGOTÁ
- EL TIEMPO DE REVISIÓN ES DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES Y SE DICTAMINARA SI SE HACE EFECTIVA O NO.
- RECUERDE QUE EL PRODUCTO PIERDE GARANTÍA SI ES MANIPULADO POR TERCEROS O PERSONAS NO AUTORIZADAS POR BIGMOTION.
- SI EL PRODUCTO PRESENTA HUMEDAD EN SU PARTE ELÉCTRICA NO TENDRÁ GARANTÍA, AL IGUAL QUE GOLPES O MAL USO EN GENERAL.
- SI SE ENCUENTRA EN UNA CIUDAD DIFERENTE A BOGOTÁ, TENGA EN CUENTA QUE DEBE ASUMIR EL COSTO DE ENVIÓ DEL PRODUCTO O EN SU DEFECTO DE LA PARTE QUE ESTÁ PRESENTANDO EL INCONVENIENTE, TAL COMO: BATERÍAS O CARGADOR. (ANTES DE ENVIAR EL PRODUCTO, DEBE CONTACTAR A SERVICIO TÉCNICO PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES)
- SI EL ERROR PERSISTE DESPUÉS DE REALIZAR LA PRIMERA GARANTÍA, BIGMOTION SE HACE RESPONSABLE DE LA MITAD DEL COSTO DEL ENVÍO PARA UNA NUEVA REVISIÓN.

GARANTÍA POR 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA

### TENGA EN CUENTA

- LOS PICOS O CAMBIOS DE VOLTAJE . PARA ESTO SE RECOMIENDA TENER UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE SIEMPRE , PARA CONECTAR EL CARGADOR. **BIGMOTION NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL CARGADOR POR ESTA CAUSA.**

- NO SE REPONDE POR LA MANIPULACION DE ELECTRICA Y ELECTRONICA DEL PRODUCTO, POR PERSONAS EXTERNAS A NUESTROS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR BIGMOTION.

- NO SE RESPONDE POR GARANTIAS , CUANDO EL CARGADOR SE ENCUENTRE DEFORME EN SU ESTADO FISICO (GOLPEADAS, ROTAS , CON RAYONES , ABUYADURAS O EN SUS BORDES QUEMADOS).

- CADA VEZ QUE NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO REALICE LA GARANTIA DEL PRODUCTO, PROCEDERA A REALIZAR UN VIDEO EN EL CUAL SE MOSTRARA QUE EL FALLO PRESENTADO YA NO PERSISTE, Y QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

- ESTE VIDEO SE ENVIARA AL WHATSAPP O CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE QUIEN PRESENTO EL RECLAMO, PARA BRINDARLE MAYOR CONFIABILIDAD Y DEJAR CONSTANCIA DE NUESTRO SERVICIO TECNICO. SI EL PRODUCTO LLEGA A SU DESTINO FINAL CON ALGUN INCONVENIENTE, LA EMPRESA TRANSPORTADORA ENCARGADA "SERVIENTREGA" ASUME LA RESPÓNSABILIDAD EN EL DAÑO DEL PRODUCTO, BAJO EL VALOR DECLARADO EN LA GUIA CORRESPONDIENTE.POR ENDE ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE REVISAR EL CONTENIDO DE LA CAJA ANTES DE FIRMAR LA GUIA DE RECIBIDO.

FIRMA APROBADO _____

# GARANTÍA SALVAESCALERA ELÉCTRICA

| PARTE | GARANTÍA |
|---|---|
| ESTRUCTURA EN ALUMINIO | 1 AÑO, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO APLICA RALLONES, GOLPES O SOBREESFUERZO |
| PARTES PLASTICAS, LLANTAS Y ORUGA | SIN GARANTÍA |
| TAPICERÍA/FORROS | SIN GARANTÍA |
| MOTOR | 6 MESES, POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, NO APLICA POR SOBREESFUERZOS |
| PANEL DE CONTROL Y BATERÍAS | 6 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO APLICA GOLPES, SOBRECARGAS O CARGAS CORTAS PERIÓDICAS. |
| FRENO ELECTROMAGNÉTICO | 6 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR GOLPES, HUMEDAD O CORTO CIRCUITO. |
| CARGADOR | 3 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO APLICA GOLPES, SOBRECARGAS O CARGAS CORTAS PERIÓDICAS. |

TODA GARANTÍA SERÁ CUBIERTA EN LAS INSTALACIONES, POR ENDE, EL CLIENTE ASUMIRÁ EL COSTO DE TRASPORTE DEL EQUIPO. EL TIEMPO DE REVISIÓN ES DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES Y SE DICTAMINARA SI EL PRODUCTO TIENE GARANTÍA, EL PRODUCTO PIERDE GARANTÍA SI ES MANIPULADO POR TERCEROS. EVITAR QUE LA PARTE ELECTRÓNICA O ELÉCTRICA TENGA CONTACTO CON EL AGUA, SI EL PRODUCTO PRESENTA HUMEDAD EN SU PARTE ELÉCTRICA NO TENDRÁ GARANTÍA. SE RECOMIENDA USAR UN SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE, LA GARANTÍA NO APLICA PARA GOLPES, SOBREVOLTAJES O REPARACIONES REALIZADAS POR UNA PERSONA DIFERENTE A NUESTRA EMPRESA.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

LAS SIGUIENTES PARTES NO TIENEN GARANTÍA, Y ESTO DEBE QUE PUEDEN REQUERIR REEMPLAZO POR DESGASTE O USO NORMAL.

PARTES PLÁSTICAS - ESCOBILLAS MOTOR - FUSIBLES/BOMBILLO - LLANTAS/NEUMÁTICOS - ACCESORIOS COMO ESPEJOS - LLAVES DE ENCENDIDO – RODAMIENTOS – TAPICERÍA

HE LEÍDO LAS GARANTÍAS CORRECTAMENTE Y FIRMO ACEPTANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO/GARANTÍAS

FIRMA DEL COMPRADOR _____

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244470437

(415)7707212489984(8020) 000014124447043 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 1 9 1 1 1 4 1 8 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 9 1 1 1 4 1 8 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ | RODAS | DIANA | PAOLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 88 130 D 24

42. Correo electrónico: dinasanchezrodas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 4 2 1 2 1 4 6 4 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 9 0 9 0 1 | 4 7 7 5 | 2 0 2 6 0 4 0 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐ 61. Fecha ☐

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

Cuenta de Cobro 001

Fecha: 30/03/2026

Fundación Construyendo Futuro
NIT: 900310195-2

PAGA A

Diana Paola Sánchez Rodas

CC 1.019.111.418

LA SUMA DE

$15.000.000 (Quince Millones de pesos)

**POR CONCEPTO DE:**

Venta de Silla de Oruga

**Nota:** manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales “No he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica”, -parágrafo 2 art. 383-



Diana Paola Sánchez Rodas
CC 1.019.111.418