intecBIO
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
NIT: 900.983.096-6

# ORDEN DE TRABAJO

**Orden N°: 2099973**

**Tipo servicio: Correctivo**

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | AUTOCLAVE | **Serie:** | 18440226 |
| **Fecha solicitud:** | 2026-05-14 09:36:45 | **Placa:** | 5456 |
| **Marca:** | TUTTNAUER | **Código:** | |
| **Cliente:** | E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA PRINCIPAL | **Modelo:** | 5596 |
| **Usuario:** | ALEXANDER ROBAYO NOREÑA | **Ubicación:** | ESTERILIZACIÓN |
| **Dirección cliente:** | Santa Fe de Antioquia, SANTA FE DE ANTIOQUIA | | |
| **Solicitante:** | ingeniera | | |
| **Causa de falla:** | Desgaste | | |

## DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

equipo requiere cambio de conmutador

## REPUESTOS

Conmutador de arranque parada, Eaton 3x 100 amperios, para montar en tablero.

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza instalación de conmutador de encendido y apagado con perilla, marca Eaton 3 x 100 amperios. Se verifica voltaje de entrada y de salida, se verifica correcta alimentación al tablero de control y de potencia. Se realiza arranque de equipo, se miden consumos y el equipo responde correctamente. Se hacen ciclos de prueba y el autoclave se entrega trabajando normalmente. Elemento retirado se entrega al personal de ingeniería Biomédica. Equipo ok.


## OBSERVACIONES

Se instala repuesto suministrado por Intecbio previa compra a intecbio. Se hacen ciclos de prueba y medición de parámetros y el equipo se deja funcionando correctamente.

| CONTROL DE TIEMPOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y hora inicio:** | 2026-05-14 08:00:00 | **Fecha y hora final:** | 2026-05-14 13:30:00 |



**Recibe a satisfacción**
Sebastian Padilla
Ingeniero Biomédico cirugía

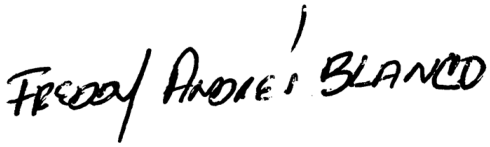

**Responsable**
FREDY BLANCO
SOPORTE TÉCNICO