

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	GRAMERA			Marca del equipo	ZULLUZ
Modelo	D420840KLS	Descripcion	no existe una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos, no hay daños en el display, los equipos responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	Cuidados	Ubicar y almacenar en un sitio nivelado sin vibraciones preferiblemente permanente, poner la balanza boca abajo, retirar la batería cuando no esté en uso, limpieza

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	maria victoria guerrero	Fecha de Compra	sin datos
Placa		Localizacion	cdi Timayui-santa marta		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	1	Rangos de tiempo de Calibracion	
Cant. Mantenimiento	1	Rangos de tiempo de Mantenimiento	

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	procedimiento realizado	inspeccion fisica
Condiciones fisicas de los equipos	a la inspeccion el equipo se encuentra en optimas condiciones fisicas, a la verificacion el equipo funciona de manera adecuada	Observaciones SE RECOMIENDA ACTUALIZAR CALIBRACIONES	cumple con lo establecido

Responsable de la inspeccion: maria victoria guerrero

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	Gramera			Marca del equipo	kalley
Modelo	kmgc01	Descripcion	no existe una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos, no hay daños en el display, los equipos responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.	Cuidados	Ubicar y almacenar en un sitio nivelado sin vibraciones preferiblemente permanente, poner la balanza boca abajo, retirar la batería cuando no esté en uso, limpieza

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	maria victoria guerrero	Fecha de Compra	sin datos
Placa		Localizacion	cdi timayui-santa marta		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	1	Rangos de tiempo de Calibracion	
Cant. Mantenimiento	1	Rangos de tiempo de Mantenimiento	

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026		verificaciones intermedias
Condiciones fisicas de los equipos	a la inspeccion el equipo se encuentra en optimas condiciones fisicas, a la verificacion el equipo funciona de manera adecuada	Observaciones SE RECOMIENDA ACTUALIZAR CALIBRACIONES	cumple con lo establecido

Responsable de la inspeccion: maria victoria guerrero

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	Balanza pesa personas			Marca del equipo	seca
Modelo	813	Descripcion	Balanza en buen estado, display funcionando, no hay daños físicos que afecta la toma de la medición del equipo, responde adecuadamente al estímulo de medición	Cuidados	Ubicar y almacenar en un sitio nivelado sin vibraciones preferiblemente permanente, poner la balanza boca abajo, retirar la batería cuando no esté en uso, limpieza

CONTROL DE EQUIPOS

Serial	8813357470041	Responsable	maria victoria guerrero	Fecha de Compra	sin datos
Placa		Localizacion	cdi Timayui -santa marta		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	2	Rangos de tiempo de Calibracion	2 años
Cant. Mantenimiento		Rangos de tiempo de Mantenimiento	

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	Procedimiento realizado El display de las balanzas digitales, se encuentra en optimas condiciones, el equipo responde adecuadamente al estimulo de una medicion de peso	verificaciones intermedias
Condiciones fisicas de los equipos	a la inspeccion el equipo se encuentra en optimas condiciones fisicas, a la verificacion el equipo funciona de	Observaciones	cumple con lo establecido

Responsable de la inspeccion: maria victoria guerrero

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

Inspeccion de operaciones equipos de medicion

DATOS BASICOS					
Nombre de equipo Tipo	tallimetro			Marca del equipo	seca
Modelo	kmgc01	Descripcion	Escala de mediciónlegible y con divisiónde escala de 1 mm. • Verificación secuencia de medición.Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición. Se encuentra bien ensamblado.El material de fabricación y las piezas que componen el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas, el tallimetro se encuentra firme	Cuidados	Utilizar paños limpios con solución desinfectante (por ejemplo, alcohol o solución clorada en concentración segura). Evitar el uso de sustancias que dañen la superficie o las marcas de medición. 2. Manipulación adecuada Debe ser manipulado con cuidado para evitar golpes o caídas que puedan desajustar la escala. No apoyar objetos pesados sobre el tallímetro.

CONTROL DE EQUIPOS

Serial		Responsable	maria victoria guerrero	Fecha de	sin datos
Placa		Localizacion	cdi timayui -santa marta		

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

Cant. Calibracion	1	Rangos de tiempo de Calibracion	
Cant. Mantenimiento	1	Rangos de tiempo de Mantenimiento	

INSPECCION DE OPERACIONES

Fecha de la verificacion	5/02/2026	procedimiento realizado	inspeccion fisica
Condiciones fisicas de	a la inspeccion el equipo se encuentra en	Observaciones SE RECOMIENDA ACTUALIZAR CALIBRACIONES	cumple con lo establecido


Responsable de la inspeccion: maria victoria guerrero

Nota: En cuanto a la cantidad, mantenimiento, esto no exime que se puedabn realizar verificaciones antes de este periodo de conformidad con los resultados obtenidos

seca 213

Estadiómetro móvil

Hoja de producto { seca 213

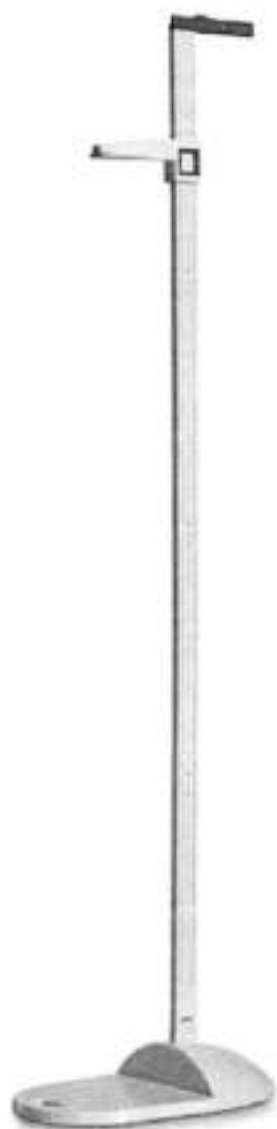

- Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.
- Con amplia base que le otorga estabilidad.
- Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición.
- Confortable y fácil de transportar.

seca 213:

El método confortable para medir la talla en cualquier sitio.

El estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requieren desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.



Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.


Consistente de varias piezas, el talímetro desmontable del estadiómetro seca 213 se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared.

Su amplia y sólida placa de base permite usarlo donde se necesite.

El estadiómetro seca 213 se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de base. Con esta propiedad, el estadiómetro seca 213 es la herramienta ideal para todos los profesionales que necesitan usar talímetros confiables en sitios que cambian con frecuencia.

Lectura precisa de los resultados de medición.

La coredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope para la cabeza. Otro detalle muy bien elaborado es la escala de fácil lectura: situada en el lateral del talímetro, permite consultar la talla ya durante la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm.

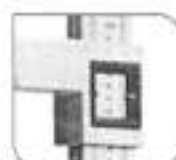

Dos grandes ventanitas y escalas en ambos lados facilitan la lectura.



Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un transporte sencillo.

Confortable y fácil de transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque el talímetro se puede desmontar en unos instantes, sino también por el asa incorporada que permite trasladar el estadiómetro seca 213 cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

Placa de base grande y sólida para una posición segura.

Bolsa seca 412 para un transporte más cómodo.

**seca 213****Datos técnicos**

- Alcance de medición: 20–205 cm, 20–205 cm / 8–81"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 824 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolso de transporte seca 412

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Datos técnicos • Dati tecnici • Tehniska data • Tehniska data • Tehniska data • Tehnisket tiedot • Technische gegevens • Datos técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά • Dane techniczne • Date tehnice

1 mm 1/16 inch	±0.5 mm	20 – 205 cm 8 ins – 81 9 ins	+10 °C ... +40 °C	a = 327 mm b = 500 mm c = 2100 mm	2.5 kg

€ Konformitätserklärung • Declaration of conformity • Certificat de conformité • Declaración de conformidad • Dichiarazione di conformità • Överensstemmelsesattest • Isaksäkran om överensstämmelse • Konformitetserklæring • Vastavastumusmukaisuusvakuutus • erklæring van overeenkomst • Declaração de conformidade • Δήλωση Συμβατότητας • zezwolenie zgodności z wymogami Komisji Europejskiej • Declarație de conformitate

seca gmbh & co. kg hereby declares that the product meets the terms of the applicable European directives. The authorised declaration of conformity can be found at: www.seca.com.

Nous, soussignés seca gmbh & co. kg, certifions par la présente que le produit satisfait aux dispositions des directives européennes applicables. La seule manière de la déclaration de conformité est disponible sous: www.seca.com.

Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las normas de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformidad completa está disponible en: www.seca.com.

Hiermit erkläre ich, seca gmbh & co. kg, dass das Produkt den Bestimmungen der einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.seca.com.

Con la presente seca gmbh & co. kg dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti delle direttive europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile su: www.seca.com.

Hiermit erkläre ich, seca gmbh & co. kg, als produzent verbindlich festzustellen: Ich bestätige europäische direktiven, bitte überreichte konformitätserklärung finden sie: www.seca.com.

Hiermit erklärt, seca gmbh & co. kg, als produzent verbindlich festzustellen: Ich bestätige EU-direktiven. Den konformitätserklärung finden sie: www.seca.com.

N. Hiermit erkläre ich, seca gmbh & co. kg, als produzent verbindlich festzustellen: Ich bestätige europäische direktiven, bitte überreichte konformitätserklärung finden sie: www.seca.com.

FR. seca gmbh & co. kg verklaart, että tämä väline tähten sovellettavien eurooppalaisten direktivien vaatimuksia. Vain oikeusmukaisuus tyytä todistaa tässä osoitteella: www.seca.com.

NL. Hiermede verklaart de seca gmbh & co. kg dat het product in overeenstemming is met de Europese Europese richtlijnen. De volledige verklaring van overeenkomst kunt u vinden op: www.seca.com.

P. Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as directivas europeas aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

GR. Με τη παρούσα, η seca gmbh & co. kg δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώθηκε στους κανονισμούς των εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά. Ολοκληρωτή τη δήλωση συμμορφώσεως, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.seca.com.

PL. Poniżej seca gmbh & co. kg oświadczam, że produkt spełnia wymagania obowiązujących na danym obszarze europejskich. Pełną deklarację zgodności jest dostępna na stronie: www.seca.com.

RO. Prin prezenta, seca gmbh & co. kg declară că produsul este conform cu regulările directivei și reglementărilor europene aplicabile. Ghidul textului complet al declarației de conformitate se găsește: www.seca.com.

Kennzeichen • Markings • Marquages • Indicazioni

Device complies with United Kingdom directives conform Notified Body for Medical Devices of the United Kingdom	Importation/representative in the United Kingdom seca UK Ltd 40 Bann Street B5 5QH Birmingham United Kingdom	Importeur/Repräsentant Schweiz • Importation/representant Suisse • Importation/representante Svizzera seca AG (Schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schwyzstrasse 3 CH-4103 FERNACH	Medical device in accordance with Regulation (EU) 2017/745

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hummel-Tiergärtchen 3-20
23069 Hamburg
Germany

T: +49 40 20 00 00 0
F: +49 40 20 00 00 50
E: info@seca.com


seca operates worldwide
with headquarters in
Germany and branches in:
seca Japan
seca United Kingdom
seca North America
seca Austria
seca Hong Kong
seca Spain
seca Mexico

seca Austria
seca Canada
seca China
seca India
seca Italy
seca Japan
seca Korea

and with exclusive
partners in more than
110 countries.




All contact details
www.seca.com

seca 213/seca 213 I



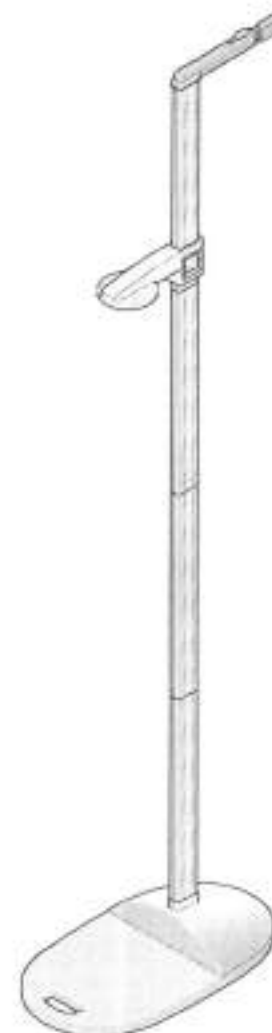


seca
Precision for health

Sevor es richtig losgeht... • Before you start... • Avant d'utiliser la balance... • Preparativos...
 Prima di cominciare veramente... • Inden De går i gang... • Det första du gör... • Før bruk...
 Ennen kuin käyttää vaakaa... • Voor u kunt beginnen... • Antes de começar... • Πριν από τη
 λειτουργία... • Przed użyciem... • Înainte de a începe...

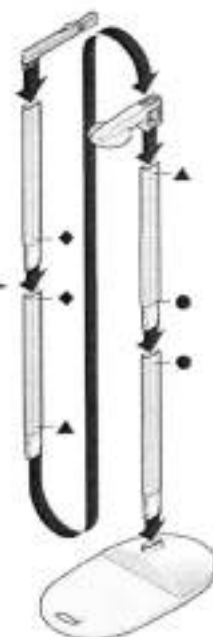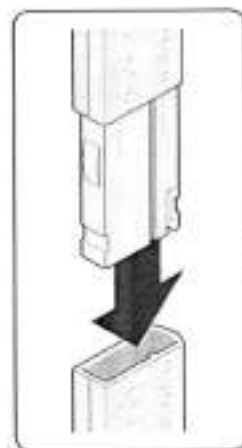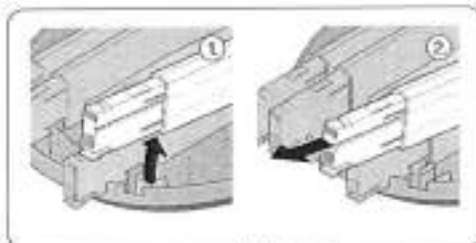

Bedienung/Reinigung • Operation/Cleaning • Utilisation/Nettoyage • Manejo/Limpieza • Uso/
 Pulizii • Betjäning/Rengöring • Användning/Rengöring • Betjening/Rengöring • Käyttö/
 Puhdistus • Bediening/Reinigen • Operação/Limpeza • Χρησιμοc/Καθάρισμα • Obsluga/
 Czyszczenie • Operare/curățare

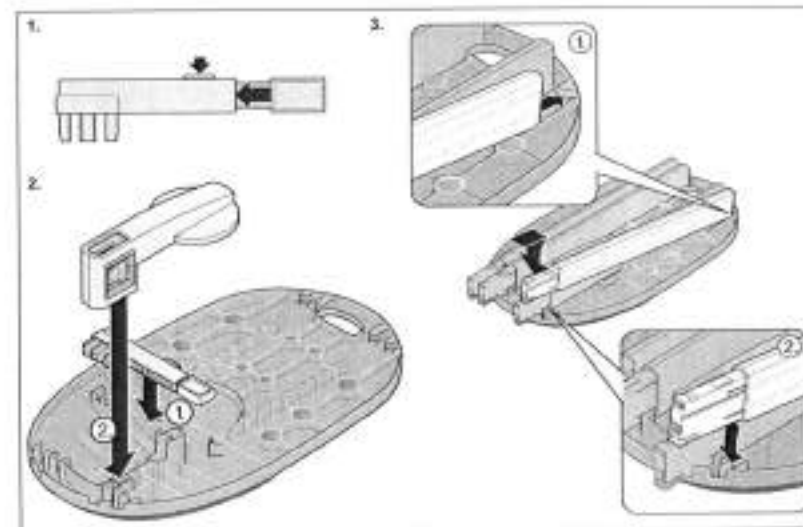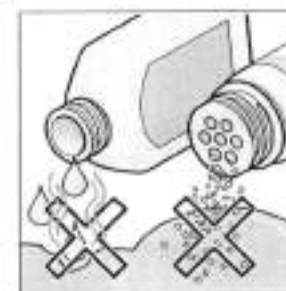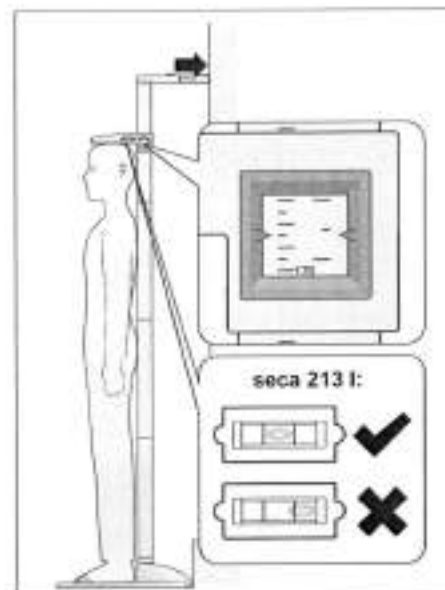



seca 354 m / 354

Báscula móvil para bebés 2 en 1 y báscula de piso para niños pequeños

- + Pese a los bebés recostados y a los niños pequeños de pie
- + Desmonte fácilmente la bandeja de pesaje de la base para usarla como báscula de piso
- + Compacto, robusto y liviano: Ideal para uso móvil
- + Báscula para bebés de alta calidad con aprobación de calibración a un precio básico
- + Amplia gama de funciones: TARA, HOLD y función de ingesta de leche materna (BMIF)



La bandeja de pesaje se puede quitar fácilmente con solo pulsar un botón.



Gracias a la bandeja de pesaje extraíble, se puede pesar incluso a niños pequeños de hasta 20 kilogramos.



seca 354 m: funcionamiento versátil gracias a la batería o a la fuente de corriente.

	seca 354 m	seca 354
Capacidad	20 kg / 44 lbs	20 kg / 44 lbs
Graduación	5 g < 10 kg > 10 g / 0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz	5 g < 10 kg > 10 g / 0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz
Fuente de corriente	Adaptador para red eléctrica, baterías	Baterías
Funciones	TARA, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/lb, desconexión automática	
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> + Carritos móviles seca 403 y seca 402 + Infantómetro seca 417 o colchoneta portátil seca 210 + Mochila seca 409 (para combinación con Infantómetro o colchoneta portátil) + Mochila de transporte seca 414 (para combinación con tabla de medición) + Mochila seca 431 + Mochila de transporte para seca 413 	

seca 417

El ligero infantómetro estable que ahorra espacio, también es ideal para uso móvil

- + Funcionamiento sencillo para uso móvil rápido
- + Se pliega para guardar espacio
- + Materiales de alta calidad para una larga vida útil
- + Superficies lisas para una fácil limpieza



El mecanismo de plegado de alta calidad garantiza una larga vida útil.

Rango de medición	10 – 100 cm o 10 – 100 cm / 4 – 39"
Graduación	1 mm o 1 mm / 1/16"
Accesorios	+ Mochila de transporte seca 412 + Mochila seca 409 o estuche de transporte seca 414 (para combinación con báscula para bebés seca 354 m / 354)



Los resultados de medición son fáciles de leer desde la gran báscula de medición.



Posible combinación

seca 354 m / 354, seca 417 y seca 414

El sistema de medición y pesaje móvil para bebés y niños pequeños

- + Pesaje y medición combinados de bebés y niños pequeños en posición horizontal
- + La báscula 2 en 1 para bebés y niños pequeños más la tabla de medición pueden transportarse fácilmente en un amplio estuche de transporte



seca 813

Báscula de piso digital de alta capacidad para uso de pacientes individuales

- + Marco de acero sólido, capacidad de hasta 200 kg
- + Base de goma antideslizante para permanecer de pie de forma segura durante la medición
- + Grandes cifras LCD para una lectura fácil
- + Activación al bajar para pesaje sin necesidad de encender la báscula

Capacidad	200 kg / 440 lbs
-----------	------------------

Graduación	100 g / 0,2 lb
------------	----------------

Funciones	Auto-hold, conmutación kg/lb, Activación al bajar, encendido automático con conexión automática, desconexión automática
-----------	---



seca 213

Estadímometro portátil

- + Simple y fácil de instalar; no necesita sujeción a la pared
- + La gran placa de piso garantiza estabilidad
- + Incluye posicionador de talón para una medición ideal de tres puntos
- + El estadímometro puede desmontarse y almacenarse de manera segura en la base para facilitar su transporte

Rango de medición	20-205 cm o 20-205 cm / 8" - 6 ft 9"
Graduación	1 mm o 1 mm / 1/8"
Accesorios	+ Mochila de transporte seca 412



El mango integrado y las piezas de bloqueo seguras hacen que el estadímometro sea fácil de transportar.

seca 213 solo está disponible en ciertos países.



Base grande para la estabilidad del paciente.

Activar
Ve a Config



FICHA TÉCNICA

K-MGC01

7 705946 200554




Generales	Tipo	Cocina
	Pantalla	LCD 2,37"
Materiales	Plataforma	Acero inoxidable
	Cuerpo	Plástico (ABS)
Funciones	Funciones de medición de volumen	Leche y agua
	Apagado automático	2 min
	Cambio de unidad	Botón inferior
	Capacidad máxima	5000 g/11 lb
	Tolerancia de Peso	1 g/0,1 oz
	Indicaciones de pantalla	Batería baja y Sobrecarga
Técnico	Alimentación	2 baterías (AAA)
	Sensores de Medición	4
Producto	Peso (kg)	0.28
	Dimensiones (mm)	221x150x20
Empaque	Peso (kg)	0.475
	Dimensiones (mm)	256x185x37
Soporte	Garantía	1 año



MANUAL DE USUARIO

GRAMERA DE COCINA K-MGC01

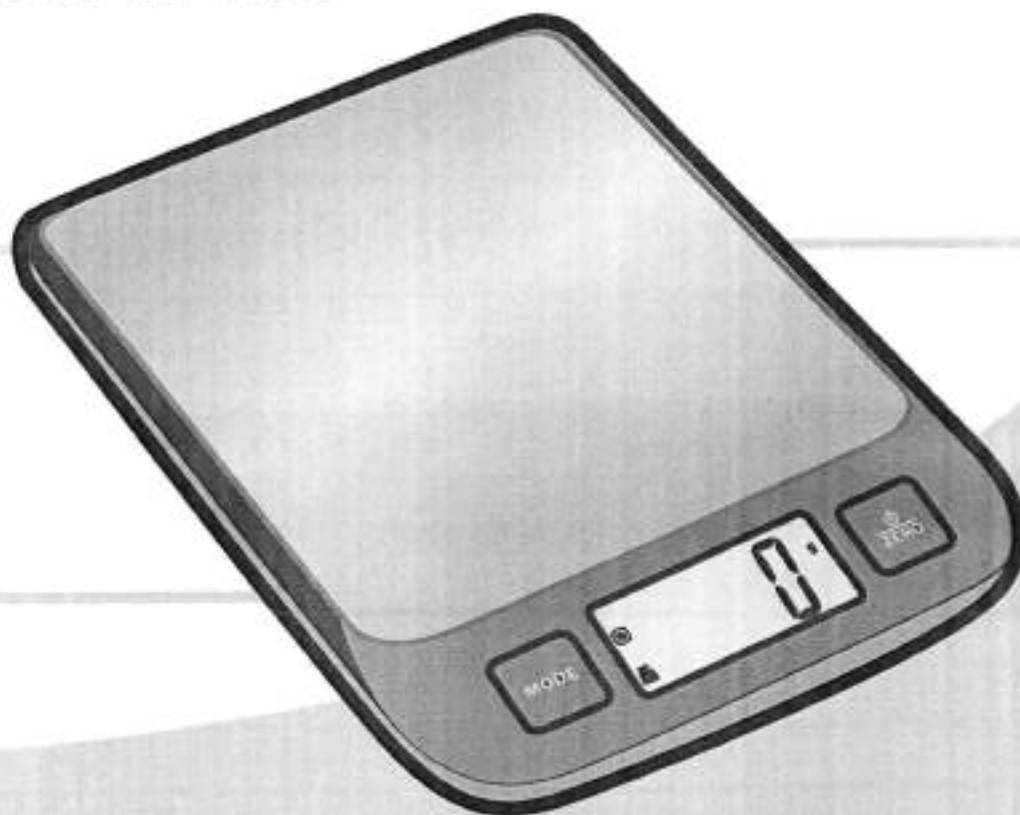

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

Especificaciones


1. Indica el volumen del agua y la leche.
2. Incluye dos unidades de medida de peso: g y lb:oz
3. Incluye dos unidades de medida de volumen: ml y fl'oz
4. Indica cuando la batería esta baja y cuando hay sobrecarga de peso.
5. Tiene cuatro sensores de peso de alta precisión.
6. Incluye una función Cero para no censar el peso del recipiente en la medida final.
7. Tiene función de auto apagado.

Para instalar o cambiar la batería

La gramera funciona con dos baterías AAA (no las incluye).

Saque las baterías usadas,

Instale las nuevas baterías. Asegúrese que los polos de las baterías estén correctamente ubicados según lo indicado en el producto.

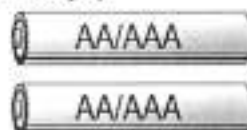

Pantalla LCD:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ajuste de peso del recipiente | 5. Unidad de Peso (kg) |
| 2. Cero Peso | 6. Unidad de Volumen (ml) |
| 3. Valor negativo | 7. Unidad de Peso (lb:oz) |
| 4. Modo | 8. Unidad de Volumen (fl'oz) |



Modo Peso



Modo Volumen de la Leche



Modo Volumen del Agua

Función de Botones

MODO Conversión de medidas



Encender/Apagar/Cero/Ajuste del peso del recipiente

UNIT

Convierte entre sistemas de medida (métrico o imperial). El botón de conversión esta debajo de la gramera.


Manual de Usuario

Información Importante




MODO

Después de encender la gramera, presione el botón **MODO** para seleccionar la unidad de medida como se muestra a continuación:

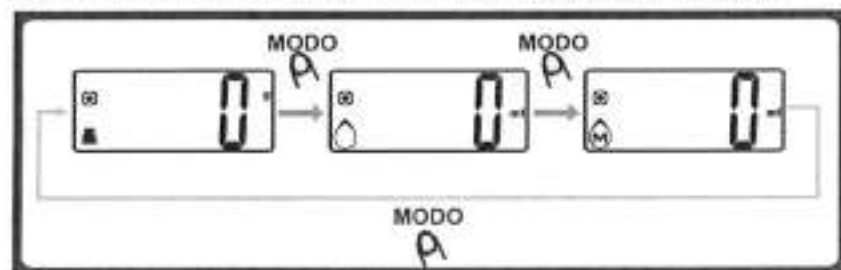

Para convertir la unidad de peso

Presione el botón **MODO** para elegir si quiere obtener medidas de peso, de volumen de la leche o de volumen del agua. Presione el botón **UNIT** para convertir entre el sistema de medida Métrico (g, ml) o Imperial (lb: oz, fl'oz). A continuación se muestra un ejemplo de conversión de unidad de peso:

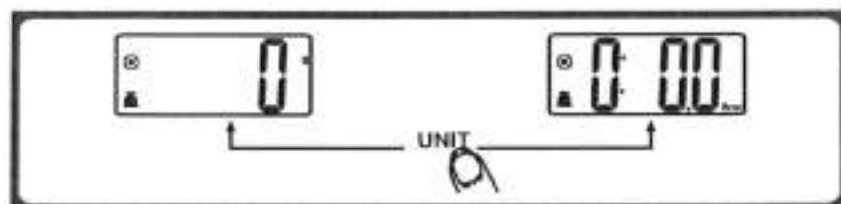


- Cuando selecciona g como unidad de peso, la medida de volumen por defecto es ml.
- Cuando selecciona lb:oz como unidad de peso, la medida de volumen por defecto es fl'oz.

Para comenzar a pesar

1. Modo peso

- Sitúe la gramera sobre una superficie plana y estable.
- Si va a utilizar un recipiente, póngalo sobre la gramera.
- Presione (⏻/ZERO) para encender la gramera.
- Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0". Presione el botón **MODO** para convertir a modo peso.
- Ubique el producto que quiere pesar sobre la gramera (o el recipiente) para comenzar a pesar. La pantalla LCD mostrará el peso de este.
- Si el producto que está pesando es agua o leche, presione el botón **MODO** para elegir el modo volumen y obtener el volumen del producto.

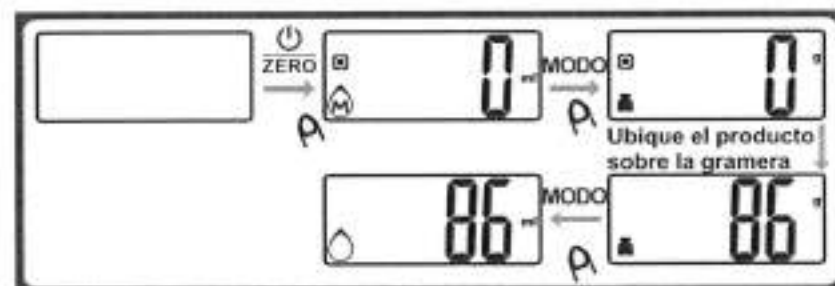



2. Modo Volumen


- Sitúe la gramera sobre una superficie plana y estable.
- Presione (⏻/ZERO) para encender la gramera.
- Espere hasta que la pantalla LCD muestre "0". Presione el botón **MODO** para elegir el **Modo Agua** o **Modo Leche**.
- Coloque el recipiente vacío sobre la gramera, la pantalla LCD mostrará el peso del recipiente.
- Presione el botón (⏻/ZERO) para poner la gramera en cero o para no contabilizar dentro del peso final el peso del recipiente.
- Vierta el líquido (agua o leche) en el recipiente, la pantalla LCD mostrará el volumen del líquido.
- Presione el botón **MODO** para elegir el **Modo Peso** y conocer el peso del líquido.



Función Cero Peso y función de ajuste de peso del recipiente

Para pesar diferentes productos de manera consecutiva sin tener que remover productos de la gramera debe: poner el primer producto sobre la gramera y mirar el peso en la pantalla, luego presione el botón (⏻/ZERO) para resetear los números mostrados en la pantalla y volver a poner está en cero sin agregar el siguiente producto. Esta operación se puede repetir varias veces.

- **Condición 1:** función cero peso. Cuando la suma total de todos los productos sobre la gramera es menor o igual a 200 g la pantalla mostrará "0" luego de presionar el botón (⏻/ZERO) y aparecerá el símbolo de Cero Peso a la izquierda.

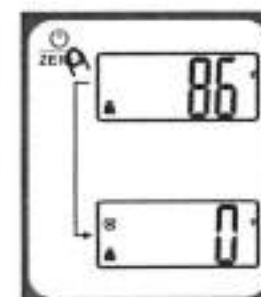

Kalley®