Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones IV. Tipo Luer Slip.

REF 81-024




REGISTRO INVIMA RIESGO

2017DM-0001179-R1
Riesgo: IIA

Vida Útil de 5 años
Si se almacena de acuerdo a recomendación del fabricante

Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones IV. Tipo Luer Lock.

REF 81-014

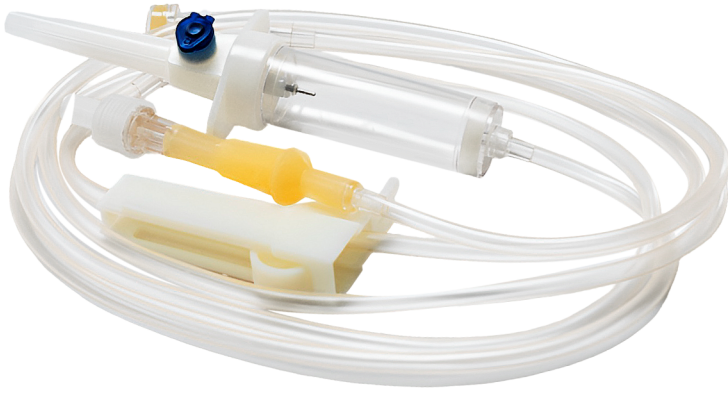

Presentación Comercial
100 unidades
por corrugada

DESCRIPCIÓN

Dispositivo médico desechable, empleado en la administración de soluciones intravenosas, que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica, el cual proporciona 60 gotas por ml.

Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones IV.

www.globalhealthcare.net

INDICACIONES DE USO

–Los equipos de microgoteo sin aguja para administración de soluciones. Tipo Luer Lock/Slip, se utilizan para administrar soluciones y medicamentos directamente en el torrente sanguíneo a través de una vena.

–Esto permite una administración precisa y controlada de medicamentos como: antibióticos, analgésicos, quimioterapia entre otros.

–Administración de anestesia.

CARACTERÍSTICAS

–El equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones. Tipo Luer Lock/Slip está elaborado en PVC de grado médico, garantizando biocompatibilidad.

–Libre de látex, para minimizar riesgos de reacciones alérgicas.

–Estéril E/O, para prevenir contaminaciones.

–Empaque individual con sistema "abre fácil", facilitando su uso.

–Transparente, permitiendo la visualización del flujo de líquidos.

–Flexible, para adaptarse a diferentes posiciones del paciente.

–Control preciso del goteo en la administración de líquidos.


–Compatible con buretas, bolsa o frascos de líquidos y/o medicamentos para mayor control.

–Punta tipo torpedo, para facilitar la inserción.

–Funciona por caída a gravedad.

PRODUCTO Y ESTRUCTURA

Referencia 81-024.Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones. Tipo Slip.

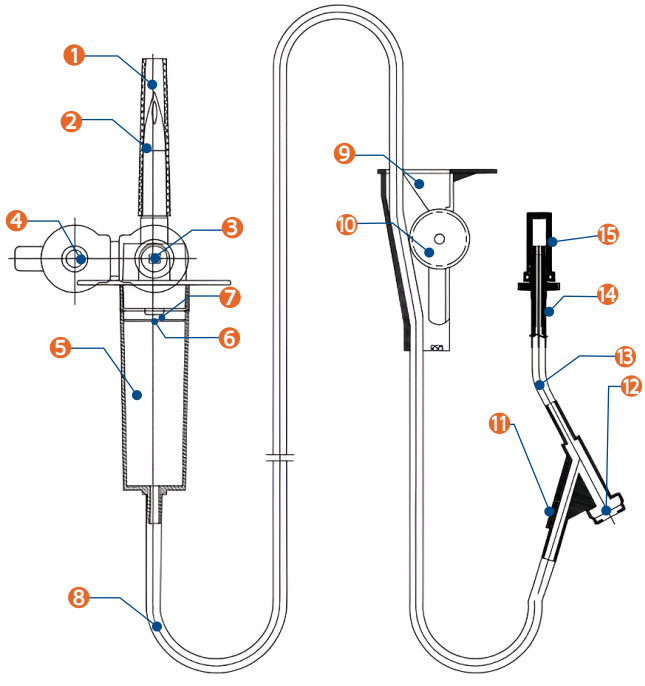


ESTRUCTURA	MATERIAL/COMPONENTE
1.Tapa protectora para la punta	Polietileno (PE)
2.Punta (60 gotas/ml)	ABS
3.Filtro de ventilación	PTFE
4.Tapa de ventilación	PVC
5.Cámara de goteo	PVC
6.Pasador para 60 gotas/ml.	Acero Inoxidable
7.Soporte del pasador (135 cm)	PVC
8.Filtro de solución (15 μm)	ABS y nailon
9.Tubo superior	PVC
10.Cuerpo del regulador de flujo	ABS
11.Rueda del regulador de flujo	ABS
12.Conector en Y	ABS
13.Pieza de inyección	Libre de látex
14.Conector Luer-slip	ABS
15.Tapa protectora para el conector	Polietileno (PE)

Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones IV.

www.globalhealthcare.net

Referencia 81-014. Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones. Tipo Luer Lock.

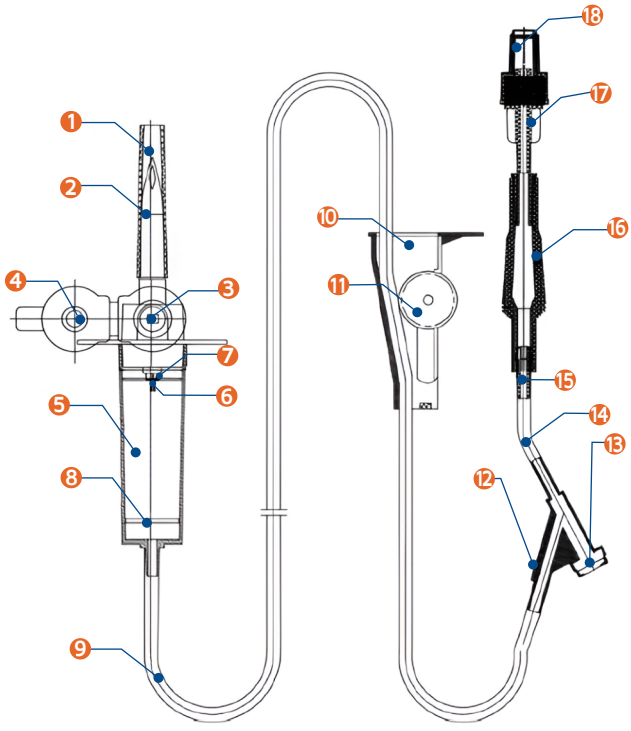

ESTRUCTURA	MATERIAL/COMPONENTE
1.Tapa protectora para la punta	Polietileno (PE)
2.Punta (60 gotas/ml)	ABS
3.Filtro de ventilación	PTFE
4.Tapa de ventilación	PVC
5.Cámara de goteo	PVC
6.Pasador para 60 gotas/ml.	Acero inoxidable
7.Soporte del pasador (135 cm)	PVC
8.Filtro de solución (15 μm)	ABS y nailon
9.Tubo superior	PVC
10.Cuerpo del regulador de flujo	ABS
11.Rueda del regulador de flujo	ABS
12.Conector en Y	ABS
13.Pieza de inyección	Libre de látex
14.Tubo inferior	PVC
15.Conector	PVC
16.Bulvo	Libre de látex
17.Conector Luer-Lock	ABS
18.Tapa protectora para el conector	Polietileno (PE)

PRESENTACIÓN COMERCIAL

REF	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CÓDIGO DE BARRAS
81-024	Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones Tipo Luer Slip.	100 unidades/corrugado	Unidad: 872237009022 Corrugado: 40872237009020
81-014	Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones. Tipo Luer Lock. Con filtro.	100 unidades/corrugado	Unidad: 872237005277 Corrugado: 40872237005275

Equipo de microgoteo sin aguja para administración de soluciones IV.

www.globalhealthcare.net

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparar la bolsa, frasco o bureta con la solución a administrar.

2. Cerrar la llave de paso del equipo.

3. Quitar el protector del conector y conectar el punzón.

4. Llenar la cámara de goteo hasta el nivel requerido.

5. Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire.

6. Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación.

7. No permita que quede aire atrapado en la manguera.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Este dispositivo no puede ser usado con fármacos lipofílicos.
- Estéril, a menos que el envase esté abierto o dañado.
- No usar si los protectores de las puntas no están colocados.
- Evitar la congelación y el calor excesivo.
- El producto debe usarse inmediatamente después de abrir el sobre y desecharse después de su uso.
- No debe insertarse en recipientes para sangre o plasma.
- No reesterilizar ni reutilizar.


ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacene en lugar ventilado, seco y limpio.
- No almacene a temperatura y humedad extremas.
- Mantenga libre de gases corrosivos y evitar la luz solar directa.
- Evite apretar y colisionar durante el transporte y manténgalo en su empaque original.

DISPOSICIÓN FINAL

- Una vez usado el dispositivo debe considerarse como un producto potencialmente biopeligroso.
- Debe desecharse de acuerdo con el protocolo de cada institución o según la regulación legal local para la disposición final de dispositivos médicos.

SÍMBOLOS

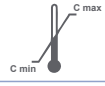Ícono	Descripción
	No utilizar si el embalaje está dañado.
	Libre de látex.
	Fecha de caducidad.
	Límite de temperatura
	Producto de un solo uso.
	Mantener seco.
	Manténganse alejado de la luz solar.
	Esterilizado usando óxido de etileno.
	Lote