MANGUERA DE SUCCIÓN

REF 71-020, 71-021, 71-023



REGISTRO INVIMA CLASE

2019DM-0020279
Clase IIA

5

Vida Útil de 5 años
Si se almacena de acuerdo a recomendación del fabricante

Presentación Comercial
1 unidad en sobre
50 sobres / Cartón

STERILE EO

DESCRIPCIÓN

De PVC siliconado, libre de látex, para un solo uso en procedimientos que requieran recolección de fluidos, con métodos de aspiración. Configurado en diferentes medidas y con conector universal en los extremos, para facilitar la adaptación a cualquier tipo de cánula o puerto de paciente, liner o contenedor de succión continua o alterna.

Manguera de succión

www.globalhealthcare.net

INDICACIONES DE USO

La manguera de succión es utilizada en todas las áreas en que requieran la recolección de fluidos por aspiración:

- Salas de Cirugía
- Cirugía Ambulatoria
- Sala de Reanimación de Urgencias
- Observación de Urgencias
- Unidad de Cuidado Intensivo Adulto, Pediátrico y Neonatal
- Salas de procedimientos
- Salas de procedimientos endoscópicos: neumología y gastroenterología
- Salas de Terapia Respiratoria
- Servicios de Hospitalización

CARACTERÍSTICAS

La manguera de succión está diseñada para ser utilizada en procedimientos en los que se realice aspiración de fluidos:

- Manguera transparente en PVC flexible.
- Diseño interior para evitar obstrucción por adherencia del contenido a las paredes.
- Baja memoria para evitar acodamientos.
- Conector universal en los extremos, permitiendo la adaptación a cualquier tipo de cánula de succión o puerto de paciente, liner o contenedor de succión continua o alterna.

Longitudes con diferentes medidas según los requerimientos de los procedimientos:


- 1,8 metros
- 3,0 metros
- 3,6 metros

Desechable

Anti oclusiones por su diseño acanalado.

PRODUCTO Y ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	MATERIAL
1.Manguera	PVC (cloruro de polivinilo blando)
2.Conector Universal	PVC (cloruro de polivinilo blando)

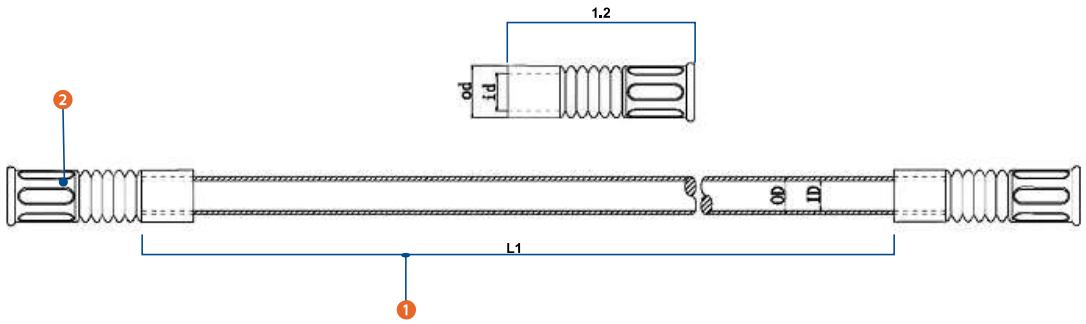

TAMAÑOS: unidades en mm					
MANGUERA			CONECTOR		
OD +- 0.5l	D +- 0.5	L1 +- 50	OD +- 0,5	ID +- 0,5	L2 +-50
10.0	7,10	1800, 3000 ó 3600	13,0	10,0	49

Manguera de succión

www.globalhealthcare.net

PRESENTACIÓN COMERCIAL

REF	PRODUCTO	CANTIDAD	CODIGO DE BARRAS
71-021	MANGUERA DE SUCCIÓN 0,635 cm X 1,8 mt estéril	1 unidad en sobre 50 sobres / Cartón	Unidad: 872237008148 Corrugado:40872237008146
71-023	MANGUERA DE SUCCIÓN 0,635 cm X 3,0 mt estéril	1 unidad en sobre 50 sobres / Cartón	Unidad: 872237001842 Corrugado: 20872237001846
71-020	MANGUERA DE SUCCIÓN 0,635 cm X 3,6 mt estéril	1 unidad en sobre 50 sobres / Cartón	Unidad: 872237007981 Corrugado:40872237007989

INSTRUCCIONES DE USO

Si el dispositivo se requiere en procedimientos en los que sea indispensable la esterilidad, es necesario ser muy cuidadosos al momento de abrir el sobre. El empaque trae los indicadores de sitio de apertura para conservar la esterilidad hasta su conexión y utilización.

1. Verifique que el empaque está intacto y que las fechas de vencimiento del producto están vigentes.
2. Prepare el succionador: liner o contenedor de acuerdo con lo disponible en la sala de procedimientos.
3. Verifique que la presión de vacío del sistema de succión sea la adecuada para el procedimiento que va a realizar.
4. Mantenga las condiciones de esterilidad del sistema durante la conexión. Conecte la manguera al puerto de paciente y proteja el conector que va al paciente.
5. Al realizar la conexión asegúrese, que quede libre de fugas y bien adaptado.
6. Una vez finalice el procedimiento, deseche el dispositivo según las recomendaciones y protocolos de la institución.

PRECAUCIONES

- Para uso único, desechar después de su uso.
- Producto estéril en EO, vigente por 5 años.
- No lo use si el paquete está abierto o dañado.
- No almacenar a temperatura y humedad extremas.
- Almacenar en lugar fresco y seco

ADVERTENCIAS

- Si el producto se reutiliza hay riesgo de tener infección cruzada y de mal funcionamiento del dispositivo.
- El producto mantiene sus características siempre y cuando se sigan las recomendaciones de almacenamiento, transporte, instrucciones de uso y desecho.
- Para evitar productos contaminados evite embalaje dañado.
- No use productos con el empaque está dañado o contaminado.
- No use productos vencidos.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Para almacenar el producto se recomienda:

- Lugar con adecuada ventilación
- Evitar temperaturas y humedad extrema
- Evite apretar y colisionar durante el transporte.
- Conserve su empaque original.

DISPOSICIÓN FINAL

- Una vez usado el dispositivo debe considerarse como un producto potencialmente biopeligroso.
- Debe desecharse de acuerdo con protocolo de cada institución o según la regulación legal local para la disposición final de dispositivos médicos y muestras de laboratorio.

SÍMBOLOS

Ícono	Descripción
	Mantener seco.
	Manténganse alejado de la luz solar.
	Producto de un solo uso.
	Libre de látex.
	Esterilizado usando óxido de etileno.