HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

BD	**TUBO BD VACUTAINER® PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA** **TAPÓN COLOR ROJO**	**Becton Dickinson de Colombia Ltda.** **Integrated Diagnostic Solutions -IDS** **Versión: 2024-001**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Tubos para extracción de sangre con sistema al vacío, estériles, recubiertos de silicona al vacío, de un solo uso, tubo seco, contienen partículas de silicio micronizado como activador de coágulo.

USO PREVISTO:
Tubo para la obtención primaria y conservación de muestras con fines de examen diagnóstico in vitro. Usados para obtener una muestra de suero para estudios de química e inmunología.

REGISTRO SANITARIO:

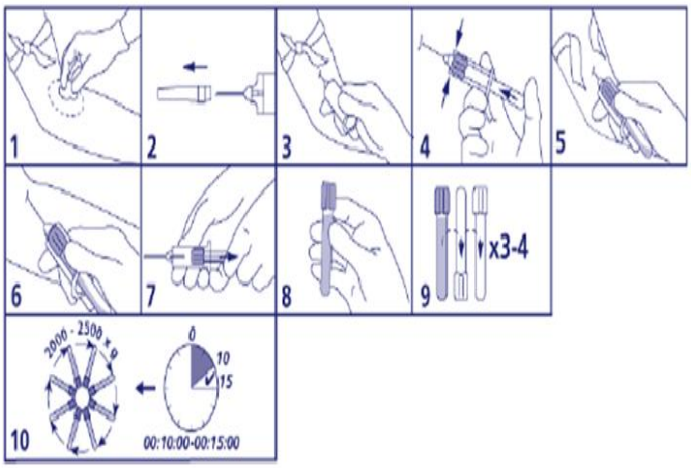
Número:	2016DM-0014287	**Clasificación de Riesgo:**	I
Vigencia:	febrero de 2026	**Tipo De Dispositivo:**	No Invasivo
Titular:	Becton Dickinson de Colombia	**Fabricante:**	Becton Dickinson & Company
Dispositivo:	No Reutilizable	**Esterilización:**	Irradiación gama, Co-60

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATÁLOGO	VOLUMEN	PRESENTACIÓN	TAMAÑO DE TUBO	TAPÓN DE CIERRE
366668	3.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 75 mm	Hemogard™
367812	4.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 75 mm	Hemogard™
367815	6.0 ml	Caja x 100 Unidades	13 x 100 mm	Hemogard™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material del tubo	Polietileno tereftalato (PET)
Material de Tapón	Elastómero bromobutilo
Tipo de Cierre	Tapón de seguridad BD Hemogard™ - tapón convencional en catálogo 366668.
Indicador de línea de llenado	Si.
Aditivos	Aditivo Procoagulante: Partículas de silicio micronizado como activador de coágulo. Tubo seco.
Almacenamiento	Temperatura: 4 a 25°C - Humedad relativa de 15-80%. No exponer a la luz directa del sol.
Tipo de etiqueta	Papel con información de Lote- Fecha de vencimiento.
Estándares certificación	ISO 14001, EMS37154, ISO 13485, FM79169

MODO DE USO	DESCRIPCIÓN DE USO
	1. Selección de la vena en la cual se va a realizar la punción. 2. Colocar Torniquete en banda. 3. Realice el procedimiento de asepsia 4. Realizar la inserción con la aguja Múltiple a un ángulo de aproximado de 30 °C. 5. El segundo tubo para recolectar es el tubo tapa roja 6. Una vez recolectado mezclar por inversión de 5 veces.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Consultar especificaciones del analito.

BD, el logo, y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company© 2024.