HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

BD	**TUBO BD VACUTAINER® PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE VENOSA. Aditivo Oxalato de Potasio Fluoruro de Sodio.**	**Becton Dickinson de Colombia Ltda.** **Specimen Management** **Versión: 2025-001**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Tubos para extracción de sangre con sistema de vacío de polipropileno, estériles, con aditivo inhibidor del proceso de glucólisis Fluoruro de Sodio.

USO PREVISTO:
Tubo para la obtención primaria, transporte y conservación de muestras con fines de examen diagnóstico in vitro. Usados para obtener una muestra de plasma.

REGISTRO SANITARIO

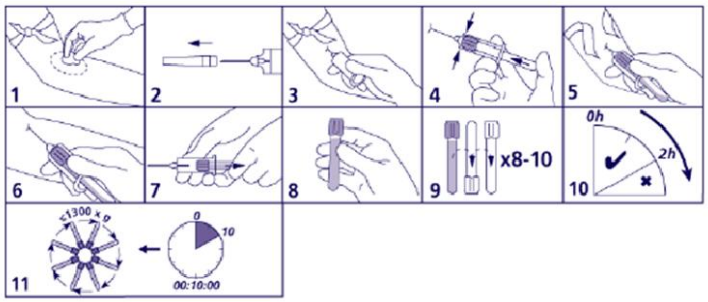
Número: 2016DM-0014287	**Clasificación de Riesgo:** I
Vigencia: febrero de 2026	**Tipo De Dispositivo:** No Invasivo
Titular: Becton Dickinson de Colombia Ltda.	**Fabricante:** Becton Dickinson & Company
Dispositivo: No Reutilizable	**Esterilización:** Irradiación gama, Co-60

ESPECIFICACIONES

CATALOGO	VOLUMEN	VOLUMEN DE LLENADO	TAMAÑO DE TUBO	TAPÓN DE CIERRE
367925	13 x 100 mm	6 ml	Caja X 100 unidades	Hemogard™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material del tubo	Polietileno tereftalato (PET)
Material de Tapón	Elastómero bromobutilo
Indicador de línea de llenado	Etiqueta con línea indicadora de llenado.
Aditivos	Aditivo Anticoagulante: Oxalato de Potasio 12 mg. Aditivo Preservante: Fluoruro de Sodio 15 mg.
Almacenamiento	Temperatura: 4 a 25°C - Humedad relativa de 15-80%. No exponer a la luz directa del sol.
Tipo de etiqueta	Papel con información de Lote- Fecha de vencimiento.
Estándares certificación	ISO 13485.

MODO DE USO	DESCRIPCIÓN DE USO
	1.Selección de la vena en la cual se va a realizar la punción. 2.Colocar Torniquete. 3.Realice el procedimiento de asepsia 4.Realizar la inserción con la aguja Múltiple a un ángulo de aproximado de 15- 30° 5.Después de tomar la muestra en el tubo EDTA K2 recolectar tubo de Oxalato de Potasio. 6. Una vez recolectado mezclar por inversión de 8 a 10 veces.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Consultar especificaciones del analito.

BD, el logo, y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company© 2025.