Mepilex® Lite

Apósito de Poliuretano Extrafino

Espuma de Poliuretano Extrafino con Tecnología Safetac®


- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Mantiene un medio ambiente húmedo.
- Se puede moldear con tijeras de acuerdo a la medida requerida para cubrir la herida.
- Atraumático durante la retirada, no daña la piel circundante ni afecta la herida.

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnologia Safetac® son atraumáticos en la remoción[1]. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional[2,3]. lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales

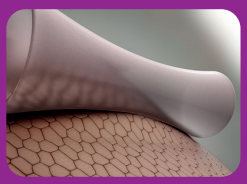


No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®

Film posterior color piel
- Permeable a gases
- Impermeable a líquidos
- Barrera efectiva contra virus y baterias (Microbios <25nm)

Safetac® TECHNOLOGY

Suave capa de silicona Safetac®
- Atraumático para la herida y la piel perilesional
- Minimiza el riesgo de maceración

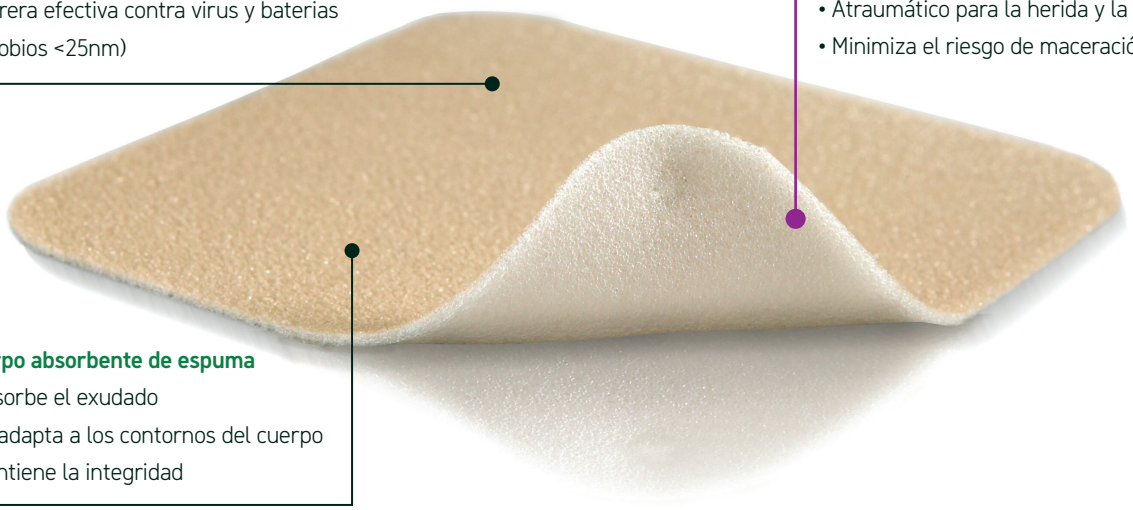

Cuerpo absorbente de espuma
- Absorbe el exudado
- Se adapta a los contornos del cuerpo
- Mantiene la integridad

LATEX

Mölnlycke®

Mepilex® Lite

Mölnlycke®

¿Cómo funciona Mepilex® Lite?

Mepilex® Lite es un apósito que absorbe el exudado y mantiene un medio húmedo en la herida, previniendo que el exudado macere la piel de alrededor de la herida, disminuyendo así el riesgo de maceración. La capa Safetac® asegura que los cambios de apósito sean atraumáticos. Mepilex® Lite puede cortarse adaptándose a la forma y localización necesaria.

Indicaciones Principales

Mepilex® Lite es un apósito que absorbe el exudado y mantiene un medio húmedo en la herida, previniendo que el exudado penetre en la zona de alrededor, disminuyendo así el riesgo de maceración. Mepilex Lite esta diseñado para el cuidado de una amplia variedad de lesiones poco o nada exudativas, como ulceras en pies y pernas, ulceras por presión, quemaduras de grosor parcial, reacciones cutáneas radioactivas. También puede utilizarse para proteger la piel frágil.

Beneficios

- Puede utilizarse bajo vendajes de compresión y geles.
- Tratamiento de reacciones cutáneas radioactivas.
- Atraumático durante la retirada, no daña la piel circundante ni afecta la herida.
- Disminuye el dolor en el paciente durante la retirada.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Delgado y cómodo de llevar.
- Fácil de manejar.
- Mantiene un medio ambiente húmedo.
- Se puede moldear con tijeras de acuerdo a la medida requerida para cubrir la herida.

Precauciones

- No lo utilice en pacientes con alergia diagnosticada a los apósitos o sus componentes.




Presentaciones Mepilex® Lite

Código	Tamaño (cm)	Unidad por caja	Registro Invima
284090	6 x 8.5	5	2020DM-0021620
284190	10 x 10	5	2020DM-0021620
284390	15 x 15	5	2020DM-0021620
284599	20 x 50	4	2020DM-0021620

Almacenamiento: Lugar limpio y seco
Metodo Esterilización: ETO
Procedencia: Finlandia
Vigencia: 3 años
Certificaciones: ISO 9001, ISO 13485, CE 01965


Modo de uso Mepilex® Lite

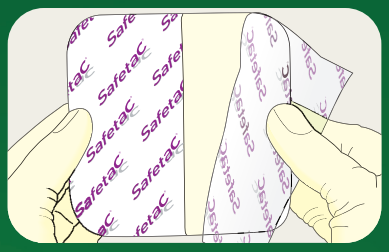

1. Limpie la lesión segun la practica clínica . Secar la piel de alrededor. Retirar los papeles protectores.



2. Colocar la capa adherente sobre la herida. No estirar. Mepilex® Lite debe cubrir la piel de alrededor al menos 5 cm. Si es necesario, Mepilex® Lite se puede cortar.

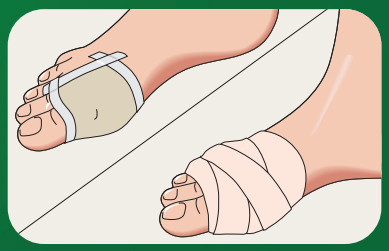

3. Fijar Mepilex® Lite con un vendaje o cualquier otra fijación cuando sea necesario.

www.molnlycke.lat

Crosswell de Colombia S.A.S.

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No 21 A - 27 Oficina 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac and Hydrolock trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.© 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.