Mepilex®

Apósito de Espuma de Suave Silicona

Apósito de espuma de poliuretano con tecnología Safetac® y microadherencia selectiva


- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión.
- Gran adaptabilidad debido al film rugoso superior.
- Minimiza el riesgo de maceración.

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnologia Safetac® son atraumáticos en la remoción[1]. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional[2,3], lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales

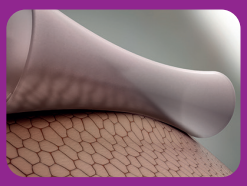

No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®


Cuerpo absorbente de espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado.
- Mantiene la integridad.
- Funciona bajo compresión.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.

Safetac® TECHNOLOGY

Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional
- Minimiza el riesgo de maceración

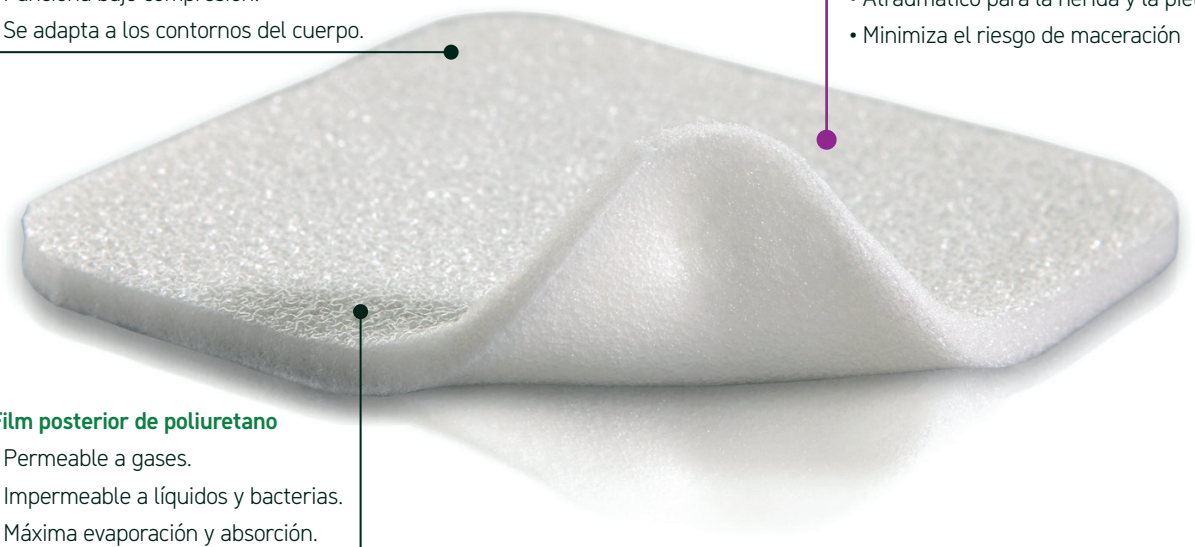

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos y bacterias.
- Máxima evaporación y absorción.

LATEX

Mölnlycke®

Mepilex®

Mölnlycke®

¿Cómo funciona Mepilex®?

Mepilex es un apósito de espuma suave y altamente conformable que absorbe el exudado y mantiene un entorno húmedo en la herida[2,14]. La capa Safetac® sella los bordes de la herida, impidiendo que el exudado se filtre a la piel circundante, minimizando así el riesgo de maceración[7]. La capa Safetac garantiza que el apósito pueda cambiarse sin que dañe la herida o la piel circundante ni exponga al paciente a dolor adicional.

Indicaciones Principales

Mepilex® puede usarse en un amplio rango de heridas exudativas, tales como lesiones por presión, úlceras en miembros inferiores o pie diabético, heridas traumaticas, erosiones en la piel y heridas se curación secundaria.

Beneficios

• Puede permanecer en la herida durante varios días, dependiendo de las condiciones de la misma.
• Minimiza el riesgo de maceración.
• Puede cortarse a la medida.
• Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de apósito.
• Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder sus propiedades de adherencia.
• Puede usarse junto a hidrogeles.
• Sepuede dejar el aposto mepilex sobre la lesion hasta 7 dias, dependiendo del estado de la lesión y de la piel peri-lesiona, o según las indicaciones del prfesional de salud.

Precauciones

• No lo utilice en pacientes con alergia diagnosticada a los apósitos o sus componentes.
• En caso de infección, consulte a a u profesional de salud para que le recete el tratamiento adecuado.
• Mepilex® no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a un profesional de salud.




Presentaciones Mepilex®

Código	Tamaño (cm)	Unidad por caja	Registro Invima
294199	10 x 10	5	2020DM-0021620
294299	10 x 20	5	2020DM-0021620
294399	15 x 15	5	2020DM-0021620
294499	20 x 20	5	2020DM-0021620
294500	20 x 50	2	2020DM-0021620

Almacenamiento: Lugar limpio y seco
Metodo Esterilización: ETO
Procedencia: Finlandia
Vigencia: 3 años
Certificaciones: ISO 9001, ISO 13485, CE 01965


Modo de uso Mepilex®

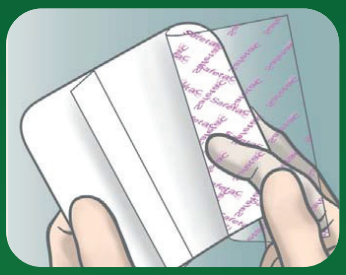

Limpiar la herida.
Retirar el film protector.



Mepilex® Debe cubrir la piel perilesional 2 cm.
Colocar la cara adherente sobre la herida.
No estirar.

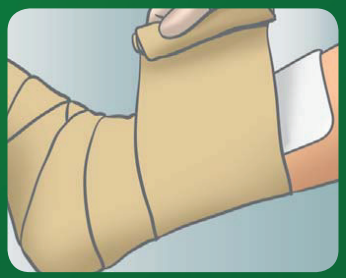

Cuando sea necesario fijar Mepilex® use una venda u otra fijacion.

www.molnlycke.lat

Crosswell de Colombia S.A.S.

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No 21 A - 27 Oficina 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac and Hydrolock trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.© 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.