SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT: 900.145.572-9
FECHA Noviembre - 2025
Contrato: 394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: OXIMETRO DE PULSO
MARCA: **EDAN - H100B**
SERIAL: -360101-M25204610089 / 360101-M25204610087 / 360101-M25204610088 / 360101-M25204610090

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

se realizó una descripción detallada de sus partes y componentes principales, incluyendo el sensor de pulso, la pantalla LCD, los botones de control y la batería recargable.

Se explicó el funcionamiento general del equipo, de como mide la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia cardíaca mediante pulsos de luz infrarroja y roja, así como el rol específico de cada componente: donde el sensor detecta el flujo sanguíneo, el procesador calcula los valores y la pantalla muestra los resultados en tiempo real.

adicionalmente, se proporcionaron precauciones de uso y recomendaciones para un buen manejo del equipo y una durabilidad de vida del mismo.

RECOMENDACIONES

- limpieza y manejo adecuado. Se recomienda limpiar el equipo con un paño suave y seco humedecido en alcohol al 70% o isopropanol al 70%.
-asegúrese de que el oxímetro siempre quede apagado y desconectado de la fuente de energía al finalizar jornada.
-Revise periódicamente la batería y extraiga las pilas si no se va a usar el equipo por más de un mes.
-utilice solo sensores autorizados por el fabricante.
-verifique periódicamente que no haya daños en los cables o sensores. Siempre siga las instrucciones del manual y, ante cualquier falla o advertencia, suspenda el uso y comuníquese con personal técnico calificado.

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera	Karen Andrea Perea - Enfermera Reg.1061771610 F.U.A.A

SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT:	900.145.572-9
FECHA	Noviembre - 2025
Contrato:	394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO:	DOPPLER FETAL
MARCA:	**EDAN - ONOTRAX II PRO**
SERIAL:	-560054-M25204780051 / 560054-M25204780052 / 560042-M25311700064

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

se realizó una descripción detallada de sus partes y componentes principales, incluyendo el transductor ultrasónico, la pantalla LCD, los controles de volumen y frecuencia, la batería recargable y los accesorios como gel conductor y cables.

Se explicó el funcionamiento general del equipo, basado en el principio Doppler para detectar el sonido del latido fetal mediante ondas ultrasónicas de baja intensidad (generalmente 2-3 MHz), así como el rol específico de cada componente: donde el transductor emite y recibe señales, el procesador analiza las frecuencias reflejadas para generar audio, y la interfaz permite ajustes de ganancia y modo de operación.

adicionalmente, se enfatizaron las precauciones de uso y buen manejo del equipo para su óptimo funcionamiento y durabilidad.,

RECOMENDACIONES

-verificar la integridad del equipo antes de cada sesión
-limpieza y manejo adecuado. Se recomienda limpiar el equipo con un paño suave y seco humedecido en alcohol al 70% o isopropanol al 70%
-Revise periódicamente la batería y extraiga las pilas si no se va a usar el equipo por más de un mes.
-aplicar cantidad de gel indicada para evitar quemaduras.
-limitar el tiempo de exposición (no más de 10-15 minutos por uso).
-limpiar componentes con desinfectantes no abrasivos despues de cada uso.

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera	Karen Andrea Perea Enfermera Reg.1061771610 F.U.A.A

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT:	900.145.572-9
FECHA	Noviembre - 2025
Contrato:	394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO:	CONCENTRADOR DE OXIGENO
MARCA:	**PHILIPS - EVERFLO**
SERIAL:	2035762

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

se realizó una descripción detallada de sus partes y componentes principales, como el compresor, las columnas de zeolita, el sistema de filtros, la válvula solenoide, el humidificador y los controles digitales.

Se explicó el funcionamiento general del equipo, basado en el principio de adsorción por presión alternada (PSA), que separa el oxigeno del aire ambiente para entregar concentraciones puras (90-95%). Además, se detalló el rol de cada componente: como el compresor que genera presión, las columnas retienen nitrógeno, los filtros purifican el aire y los controles regulan flujo y alarmas.

Por ultimo, se indicaron algunas precauciones para tener con el equipo y darle el correcto funcionamiento y una durabilidad con su óptimo uso y buen manejo

RECOMENDACIONES

-verificar la integridad del equipo antes de cada sesión
-limpieza y manejo adecuado. Se recomienda limpiar el equipo con un paño suave y seco humedecido en alcohol al 70% o isopropanol al 70%
-mantener el equipo en áreas ventiladas
-Realizar una limpieza de filtros regularmente.
-evitar golpes o exposición a humedad.
-verificar alarmas de baja presión o pureza.
-verifique periódicamente que no haya daños en los cables, Siempre siga las instrucciones del manual y, ante cualquier falla o advertencia, suspenda el uso y comuníquese con personal técnico calificado.

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera	Karen Andrea Perea Enfermera Reg.1061771610 F.U.A.A

SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT:	900.145.572-9
FECHA	Noviembre - 2025
Contrato:	394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO:	CENTRIFUGA
MARCA:	INDULAB - 035A
SERIAL:	17682

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

se realizó una introducción al equipo, destacando su importancia en procesos de laboratorio para la separación de muestras por centrifugación.
Se describieron detalladamente sus partes y componentes principales, como el rotor, la tapa de seguridad, el panel de control digital, el motor, los baldes o tubos adaptadores y el sistema de bloqueo automático. Cada elemento se explicó visualmente y ejemplos prácticos de su utiización.
Además, se abordó el funcionamiento paso a paso: desde la instalación de muestras, selección de parámetros (velocidad en RPM, tiempo y temperatura), hasta el ciclo de centrifugación, paradas de emergencia y protocolos de mantenimiento. Se demostraron operaciones en vivo, pruebas de calibración y medidas de seguridad, como el uso de equipo de protección y verificación de balances.

RECOMENDACIONES

-Realizar una limpieza regular del equipo, utilizando soluciones desinfectantes no corrosivas y evitando solventes agresivos
-inspeccionar visualmente el rotor y los accesorios después de cada uso
-se aconsejó lubricar las juntas tóricas y piezas móviles con grasa de silicona o vaselina, según lo indicado por el fabricante, para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.
-mantener la centrífuga sobre una superficie nivelada y estable
-verificar el equilibrio de los tubos o recipientes en el rotor antes de cada centrifugación, así como asegurar que la tapa esté correctamente cerrada para evitar accidentes.
-realizar mantenimientos preventivos periódicos, incluyendo calibraciones y revisiones técnicas

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera líder	Karen Andrea Perea – Enfermera – Reg. 1061771610 F.U.A.A

SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT:	900.145.572-9
FECHA	Noviembre - 2025
Contrato:	394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO:	ASPIRADOR DE SECRECIONES
MARCA:	**PULMO MED- 7E-A**
SERIAL:	YU24120026

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se realizo una descripción detallada de sus componentes principales y el funcionamiento de su sistema, se explicaron las partes fundamentales del equipo, como el motor de succión, el control de presión, lo conectores para las mangueras, el recipiente y los filtros.
Se abordo el funcionamiento general del equipo, destacando como regula la presión para garantizar una succión segura y eficiente, asi como la importancia de una correcta manipulación para evitar daños en el paciente. Se dan algunas precauciones de uso para asegurar la durabilidad del equipo.

RECOMENDACIONES

-Realizar aspiraciones intermintentes de no más de 10 a 15 segundos.
-Implementar todos los protocoloes de seguridad para el encargado y el paciente.
-Limpiar los tubos succionando agua caliente y un poco de desinfectante despues de cada uso.
-Poner siempre las mangueras en la posición indicada por los conectores de la tapa.
-Poner el equipo siempre en una superficie plana y estable.
-realizar mantenimientos preventivos periódicos, incluyendo calibraciones y revisiones técnicas

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera Lider	Karen Andrea Perea - Enfermera Reg.1061771610 F.U.A.A

SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT: 900.145.572-9
FECHA Noviembre - 2025
Contrato: 394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: EQUIPO DE ORGANOS
MARCA: **WELCH ALLYN (REF 92871) (77710-71)**
SERIAL: NO REGISTRA

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se describieron detalladamente sus partes y componentes principales, incluyendo el mango, las cabezas intercambiables (otoscopio con especulums desechables, oftalmoscopio con lentes de aumento), el iluminador Halógeno HPX o LED, los controles de brillo y los accesorios como cargadores. Cada elemento se explicó mediante forma visual, desarmes demostrativos y manejo físico.

Se abordó el funcionamiento paso a paso: desde la selección de cabezas y ajuste de intensidad lumínica, hasta técnicas de examen (neumatización en otoscopia, fijación de pupilas en oftalmoscopia y visualización de cuerdas vocales), protocolos de higiene con desinfección de superficies y cambio de especulums, y funciones de seguridad como bloqueo infantil o alertas de batería baja. Se incluyeron demostraciones en vivo con modelos anatómicos y videos clínicos.

RECOMENDACIONES

-realizar una limpieza exhaustiva después de cada uso, desinfectando las cabezas y especulums con alcohol isopropílico al 70% o soluciones aprobadas por el fabricante.
-inspeccionar regularmente el mango, baterias o cables de poder y cabezas por signos de desgaste, para su cambio inmediato.
-Verificar lentes que no presenten grietas.
-Poner el equipo siempre en una superficie plana y estable.
-realizar mantenimientos preventivos periódicos, incluyendo revisiones técnicas

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera	Karen Andrea Perea - Enfermera - Reg.1061771610 F.U.A.A

SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E
NIT:	900.145.572-9
FECHA	Noviembre - 2025
Contrato:	394 - Unidad de atención -CAQUIONA

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO:	ELECTROCARDIOGRAFO
MARCA:	**EDAN - SE-301**
SERIAL:	360625-M25205650007

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

se realizó una descripción detallada de sus partes y componentes principales, como los electrodos, cables de conexión, pantalla o impresora, y el módulo de adquisición de señales. Se explicó el funcionamiento general del equipo, donde captura y registra la actividad eléctrica del corazón mediante impulsos eléctricos, así como el rol específico de cada componente, desde la amplificación de señales hasta el procesamiento y visualización de las ondas ECG.
Por ultimo se enfatizaron en las precauciones de uso para una buena toma del procedimiento y un óptimo manejo del equipo.

RECOMENDACIONES

-verificar la integridad del equipo antes de cada sesión
-limpieza y manejo adecuado. Se recomienda limpiar el equipo con un paño suave y seco humedecido en alcohol al 70% o isopropanol al 70%, sin exponerlo a liquidos ni humedad.
-verificación de conexiones.
-mantener los electrodos limpios y libres de óxido utilizando solución salina.
-evitar la tracción o torsión excesiva de los cables para prevenir daños en las conexiones.
-realizar mantenimiento preventivo programado
-verifique periódicamente que no haya daños en los cables u electrodos. Siempre siga las instrucciones del manual y, ante cualquier falla o advertencia, suspenda el uso y comuníquese con personal técnico calificado.

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Karen Andrea	Perea	Enfermera	Karen Andrea Perea - Enfermera Reg.1061771610 F.U.A.A

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL
MARCA: TROPHY
SERIAL:

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se explica cu de sus partes y se arman / se coloca a funcionar explicando cu de sus partes funcionales.

RECOMENDACIONES Cuando se arma y desarme se efectue como se explico para NO dañar ninguna pieza.

Como organizar las mangueras en su caja

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yesica fernanda	mena	1061723912	odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: INCUBADORA DE BIOLOGICOS
MARCA: CRISTOFOLI
SERIAL: Lot: L721896

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se realiza la explicación detallada sobre el equipo describiendo c/u de sus partes y funcionamiento y se despejan se destaca la importancia de c/ componente para el control de temperatura y condiciones necesarias para el cultivo de ciertos biologicos
Se recalcan recomendaciones y garantizar la precisión y seguridad de pruebas

RECOMENDACIONES

Instalar en una superficie plana nivelada estable
Usar siempre equipo de protección personal
Mantener la T° ambiente 15° - 40°C
Usar solo indicados biologicos autorizados

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yesica Fernanda	Mena	1061723912	Odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: UNIDAD ODONTOLOGICA
MARCA: GOSPA
SERIAL:

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se realiza descripción detallada de cu de sus partes y se pone en funcionamiento. se abordó varios aspectos clave para su uso y mantenimiento preventivo y seguridad de la operación para asegurar su uso eficaz y prolongar la vida útil de esta
Se deja instalado correctamente y funcionando

RECOMENDACIONES Realizar desinfección después de cu en superficies boundy semanal de aspiración Limpiador Semanalab compresor moviles correa respaldo de pedales cables en busca de daño y falta de calibración lubricación
Evitar sobrecarga Asegurar la ergonomía en el silla se no hay suficiente presión de agua NO usar limpiar para [illegible] dispositivo y zero

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Ulsica Fernanda	Meza	1061723917	odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: COMPRESOR ODONTOLOGICO
MARCA: SCHULZ
SERIAL:

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

En la capacitación se abordaron los aspectos fundamentales para su correcto entendimiento y uso se coloca en funcionamiento se describe c/u de sus partes
El equipo se coloca en operación se enfatiza mayor abordaje mantenimiento preventivo y precauciones para evitar fallas

RECOMENDACIONES Se no hay Presión de agua Suficiente No usar ya q se quema x forzado. Realizar limpieza periodica de filtros y drenajes para evitar acumulación de humedad Mantener una presión entre 5-7 bar Instalar compresor en area ventilada seca y con bajo nivel de Ruido Evitar Sobrecarga electrica operando solo con Instrumentos recomendados

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yessica Fernanda	Mena	1061723912	Odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: LAMPARA DE FOTOCURADO
MARCA: WOODPECKER
SERIAL:

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se explica c/u de sus partes y se coloca en funcionamiento y accesorios
Se explica su funcionamiento destacando como emite luz de alta intensidad xra activar los materiales fotosensibles en el area.
Se revisan las precausiones de Seguridad y recomendaciones q trae su equipo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda verificar y limpiar regularmente la guarda de los paño limpio y seco.
Controlar el tiempo de exposicion segun las indicaciones
Realizar controles de calidad mensual xra asegurar el Rendimiento optimo del equipo

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yerica Fernanda	Mena	1061723917	odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: CAVITRON
MARCA: WOODPECKER
SERIAL: S2540111U6L

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se abordan los aspectos fundamentales relacionados con el equipo se descubrieron el u de sus partes y se pone al funcionar. Cuales los componentes Se profundiza en el funcionado mostrado como opera en diferentes contextos,

RECOMENDACIONES

Lubricar frecuente los puntos con lubricante dental
Ajustar la intensidad de vibracion segun se Requiera
Asegurar q siempre fluya el agua durante su uso para enfriar la punta y evitar daños del pacil
Limpiar para limpio el Seco y al pacient

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yelica Fernanda	Mena	1061723972	odontologa.

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: AUTOCLAVE 2400
MARCA: AUTOMAT
SERIAL: 2400SERIE: 25-A24-021

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se realizo descripción detallada de c/u de sus partes y explicando c/función y ubicación de c/u. Se abordo el funcionamiento general del equipo haciendo pruebas, destacando el proceso de esterilización mediante presión y temperatura controlada para garantizar la eliminación correcta de microorganismos Se revisan las normas de seguridad y mantenimiento para uso adecuado y prolongar su vida útil

RECOMENDACIONES Leer siempre las indicaciones del fabricante Cargar el equipo correctamente manipulando el espacio Sin sobrecargar
Monitorear constantemente los parámetros de presión de temperatura
Realizar inspecciones diarias de juntas filtros y sellos para detectar desgastes.

RELACION PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yesica Fernanda	Mena	1061723912	odontologa

SURTIMEDICAN
SUMINISTROS & CONSULTORIAS

NIT 900.084.623-3

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE CONTRATO 394 DE 2025 MUNICIPIO CAQUIONA
NIT: 900145572
FECHA DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE CAPACITACION

EQUIPO MEDICO: EQUIPO RAYOS X
MARCA: FIAD FONA X70
SERIAL: 70M1-2566

DESCRIPCION DE LA CAPACITACION

Se arma el equipo y se explica c/u de sus partes en detalle y las normas de seguridad radiologica delantal plomo barrera xray el operador y pedal se explica bien como es el boton de tiempo se efectuan disparos como cuenta el colimador Cuadro Steps manual del usuario en cualquier duda o llamar como seleccionar la tabla mas adecuada segun el grueso Se explica su montaje

RECOMENDACIONES No dejar el equipo desatendido durante la exposición.
Cuando Seguridad radiologica puede operar si no hay fuente energia NO USAR

Desconectar siempre el sistema de suministro de tension de linea mediante el interruptor de tension No uso detergentes liquidos spray, Siempre paño Paper ajustar el seco Comprobe la correcta conexión del cableado Largo del equipo cl semana

RELACION PERSONAL CAPACITADO


NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Yerica fernanda	Mena	1061723912	odontologa.


AUTOMAT



AUTOMAT
AUTOMAT
AUTOCLAVE







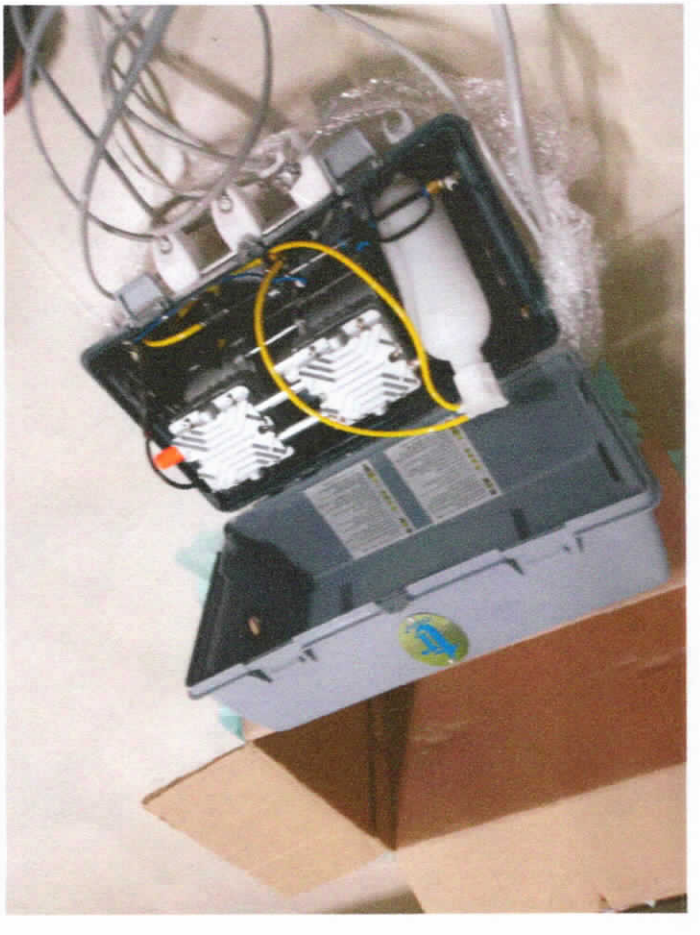

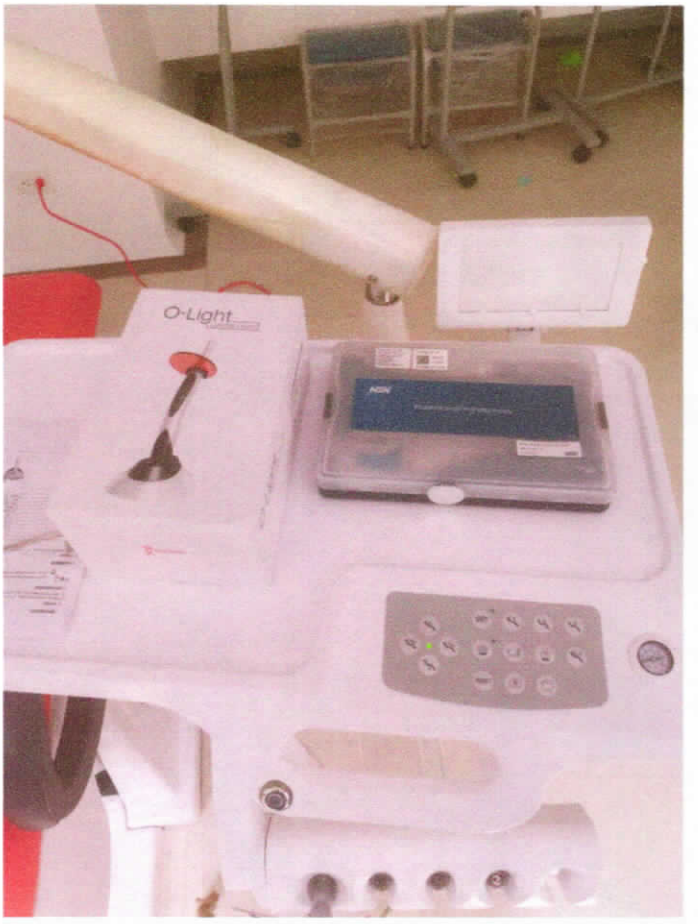


O-Light

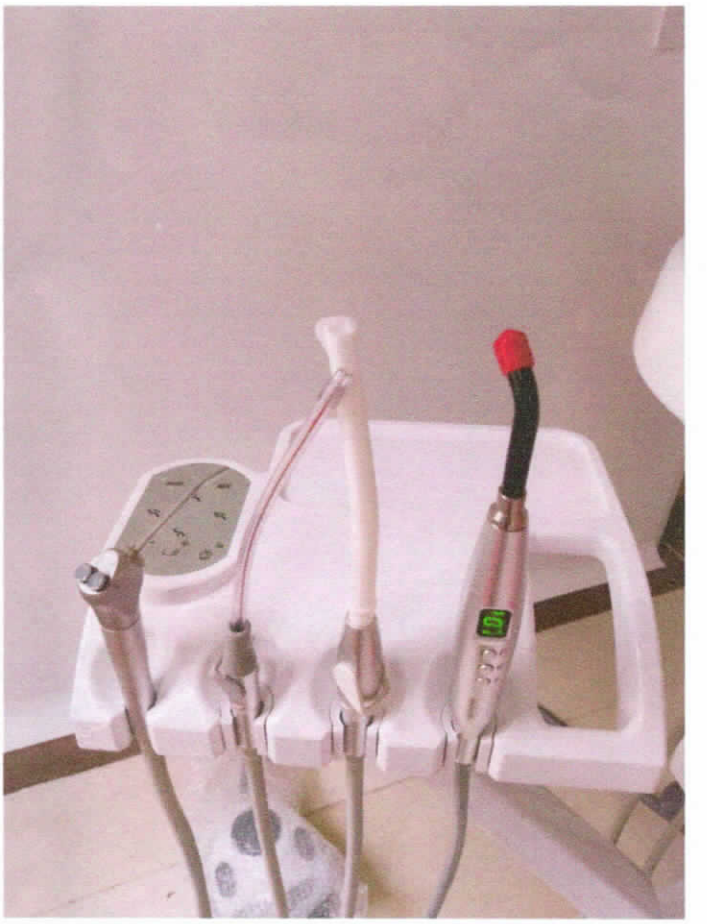

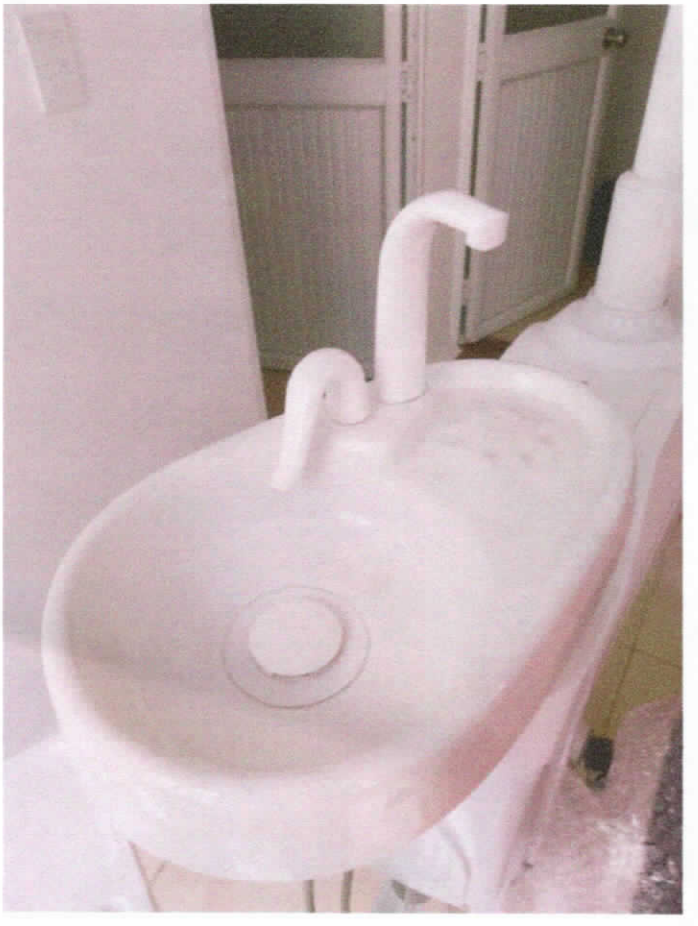






Elity 70





