Health o meter® Professional

Balanza Digital de Piso

800KL

Gran pantalla LCD de 38 mm / 1 1/2”



Ventajas

- **Pantalla de LCD de 38 mm / 1 1/2”**
  La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- **Balanza de piso de 180 kg / 397 lb de capacidad**
  La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- **Tiempo de pesaje de 5 segundos**
  La información del peso se mostrará por 5 segundos después de bajarse de la balanza para que el usuario o el paciente se estabilice

Health o meter Professional
www.homscales.com

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Balanza Digital de Piso

800KL

Health o meter® Professional



Estuche de Transporte para 800KL n.° de artículo 64771



Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
800KL	4	365.13 mm x 381 mm x 222.25 mm	8.28 kg	892076002109

Especificacións

- Capacidad: 180 kg / 397 lb
- Resolución: 0.1 kg / 0.2 lb
- Pantalla: LCD de 38.1 mm /1 ½”
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 311 mm (ancho) x 311 mm (prof.) x 44 mm (alto) / 12 ¼″ (ancho) x 12 ¼″ (prof.) x 1 3/4″ (alto)
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluida)
- Estuche opcional n.° de artículo 64771

Balanzas Health o meter® Professional
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1 (708)-377-0600
Fax: 1 (708)-377-0601

Health o meter® Professional
www.homscales.com

Health o meter® Professional

PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
www.homscales.com

USER INSTRUCTIONS

Health o meter® Professional 800KL

Cautions and Warnings

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale with anything on the platform.
- For accurate weighing, the scale must be placed on a flat, stable surface.
- The scale contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Do not drop, kick, or jump on it. Treat it with care to ensure the best performance.
- Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
- This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the battery, do not store anything on the scale.

In no event whatsoever shall Pelstar®, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications


Capacity and Resolution	Capacity: 400 lb / 180 kg / 28 st 8 lb Resolution: 0.1 lb / 0.05 kg
Environmental	Operating temperatures: 5°C to 40°C (41°F to 104°F) Storage temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 125°F) Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa; Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage
Platform Size	12 1/4” (w) x 12 1/4” (d) x 1 3/4” (h) / 311mm (w) x 311mm (d) x 44mm (h)

Before First Use

1. The scale is shipped with the batteries installed. Pull and remove the battery insulator tab from within the battery compartment before first use.
2. Place scale on flat, stable surface.
3. To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform. Wait for 0.0 to appear, then step onto the scale (disregarding the reading) and step off. This process insures the scale is set and is now ready for use. Do this whenever the scale is moved.

To Set Weight Mode (KG, LB, or ST)

Slide the switch to the desired weight mode.

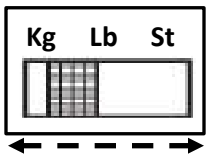

To Weigh

To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform. Wait for 0.0 to appear, then step onto the scale.



The measurement will flash on the display twice then lock onto the weight. If you continue to stand on the scale, your weight will be displayed for 10 seconds and then the scale will turn off automatically. Weight will remain displayed for 10 seconds after stepping off the scale.




Troubleshooting

If the display shows “Lo” message, replace batteries per the included instructions.




If the display shows “Err E” the load on the scale exceeds the capacity (400 lb / 180 kg /28 st 8 lb).

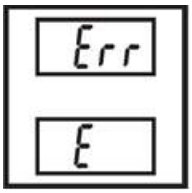

Battery Instructions

The scale is shipped without batteries already installed. The batteries are included in a small plastic bag. Follow these instructions to insert the batteries on a new scale or to replace depleted batteries on your current scale. The battery compartment is located on the underside of the scale.

1. To open the battery cover, push the battery compartment tab to the right and lift upwards. **Note:** You do NOT need to remove any screws to open the battery compartment.

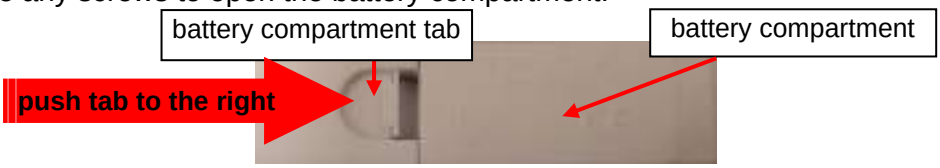


2. Install two new AAA batteries. Follow the battery illustration to ensure the batteries are inserted in the proper direction.





3. Replace the battery compartment cover by sliding the end of the cover into the battery compartment. Then push down on the tab and compartment to ensure the battery cover is firmly attached. You do NOT need the screw to close the battery compartment. You may use the screw to further secure the battery compartment if desired. Do not use the scale without the battery compartment cover attached.

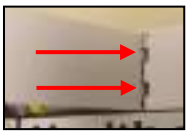

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or disposable wipe:
   ● mild soap and water solution ● 70% isopropyl alcohol ● solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
2. After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure the screen and scale parts are completely dry after cleaning.
3. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale’s finish.
4. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
5. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

1-Year Limited Warranty

This Health o meter® Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer’s sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

For information or support, please contact Customer Service at 1 (800) 815-6615 or HomProCS@homscales.com

For complete warranty terms visit www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.
Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC.
We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.
© Pelstar, LLC 2023

P/N UM800KL REV20230131

Since 2005

AVANUTRI

ISO 13485 · FDA REGISTERED · ANVISA · INMETRO

+55 24 99252-4149 · @avanutriequipamentos · export@avanutri.com.br · www.loja.avanutri.com.br

Tallimetro Portatil
AVA-312



- Fácil de montar y transportar.
- Estandarización de colores Compatible
- peso: 350Kg
- fácil de limpiar

Equipo probado y certificado por la Instituto de Meteorología más importante de Brasil IMI - INMETRO
número de patente BR 30 2018 054226

Detalles del producto



Base grande (23,5 X 13,5 cm) con diseño moderno con esquinas redondeadas.

1 GARANTIA AÑO



Nuevo medidor de altura (plano Frankfurt) con puente de contacto más alto y diseño con líneas suaves;



Nuevo indicador de lectura con tamaño extendido para una fácil visualización de la altura;



Nuevo sistema de regla de medición con sistema de ajuste preciso y suave;



Nuevo estabilizador de regla con diseño en "T" y ajustes de distancia que proporciona estabilización vertical y horizontal del equipo;



Nuevo sistema de unión de piezas para modo transporte, evitando roces entre ellas



Equipos de calidad Avanutri 15 años de tecnología

MÁS IMÁGENES DEL PRODUCTO



i CARACTERISTICAS DE PRODUCTO

- MATERIAL DE FABRICACIÓN: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno);
- PESO DEL EQUIPO: 3,5 Kg
- PESO SOPORTADO: 350 Kg
- MAXIMUM HEIGHT MEASUREMENT: 210 cm.
- MEDIDAS CAJA: 670mm x 360mm x 180mm
- TIEMPO DE FABRICACIÓN: 10 días
- PROFESIONALES ÁREAS DE USO: Nutricionista, médico, físico terapéutica, cirugía Médico Pediátrico, hospitales, Áreas Profesionales, Deportes, Endocrinología, Fisioterapia.

Only product in Brazil certified by IMI-Inmetro · Technical Manager: Rodrigo Santana CRN 4: 6100817 · Made by: Avanutri Evaluation Equipment · PREMIUM PRODUCT · ISO 13485 · FDA REGISTERED · ANVISA · INMETRO

CONTACTO

Dirección: Rua Santo Antônio, 2262, Triângulo
Ciudad: Três Rios, Estado: Rio de Janeiro, Código Postal: 25820-185,
Brasil Teléfono: +55 24 2252 2468
WhatsApp: +55 24 2252-2468
Llamar a: Rodrigo Santana
correo electrónico: export@avanutri.com.br
Sitio web: www.avanutriequipment.com



ISO 13485 · FDA REGISTERED · ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária · INMETRO

Autenticado y verificado por Norton

Norton SECURED powered by Symantec

OXIMEDIC IMPORT

***Enviamos muestra gratis solo para empresas y representantes. Regístrese a través del correo electrónico anterior. Envío no incluido.**