



Infantometro En Madera Mdf

Marca: Kramer

Referencia: MDF

Unidad de venta: unidad

Uso: medicion de ninos menores de dos años. Consultorio o sito fijo


Caracteristicas:

- **Precision de 1mm capacidad de 110 a 120 cms. (segun longitud requerida)**
- **Material de fabricacion:** madera mdf de alta densidad forrado en formica de color blanco mate
- **Cinta metrica metalica, ubicada en extremo de la parte superior para facilitar lectura.**
- **Garantiza 90 grados en el espaldar, con una base fija de ade 25cms de ancho y pieza móvil rodante**

Ficha técnica

Referencia De Marca	NA
Uso	Medicion de niños menores de dos años Consultorio o sito fijo
Novedad En El Precio	SUBIO
Unidad De Venta	UNIDAD
Disponibilidad	EN STOCK
Presentación	UNIDAD
Material	Madera mdf de alta densidad forrado en formica
Caracteristicas	Cinta metrica metalica ubicada en extremo de la parte superior para facilitar lectura
Referencias	MDF
Color	Blanco mate
Precisión	1mm capacidad de 110 a 120 cms (segun longitud requerida)
Funcionamiento	Garantiza 90 grados en el espaldar con una base fija de ade 25cms de ancho y pieza móvil rodante

BASCULA PARA BEBES BEURER JBY80

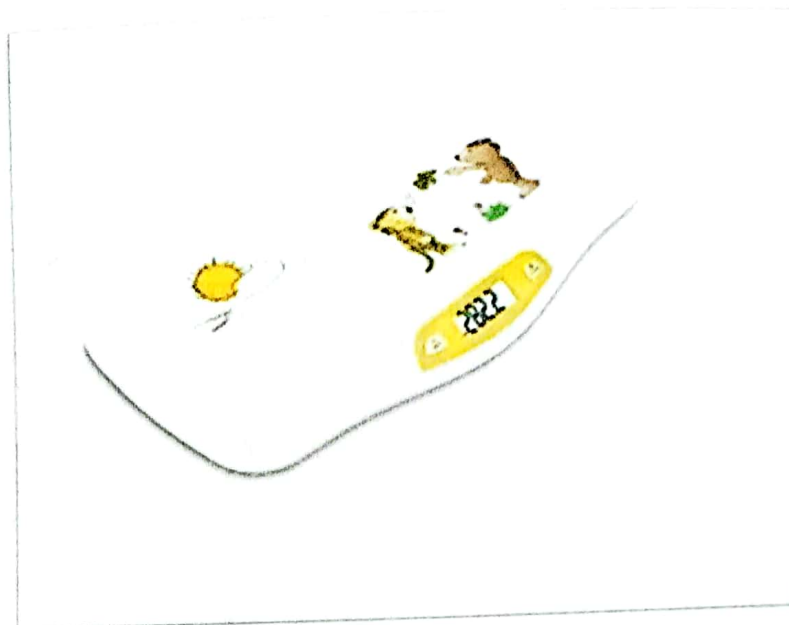

Descripción


Pantalla LCD grande y de fácil lectura * Fácil de limpiar *
Precisión de 5 g (0,011 lb / 0,018 oz) * Función de
desconexión automática * Superficie de pesaje contorneada *
Función de espera para a pesar bebés que patalean * Función
de pesaje con TARA * Cambio de kg / lb / oz * Garantía: 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * Capacidad: 20 kg * Pilas: 2
Alcalinas de 1,5 de tipo mikro AA * Medidas: 34cm x 58cm
País de origen: Alemania / Germany<

seca 213

Estadiómetro móvil

Hoja de producto (seca 213)

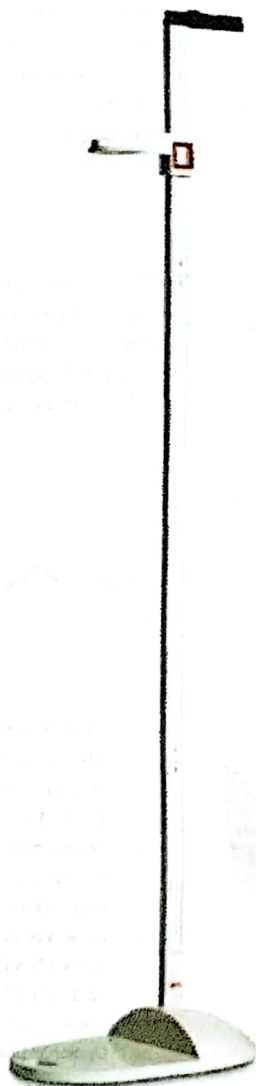

- Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.
- Con amplia base que le otorga estabilidad.
- Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición.
- Confortable y fácil de transportar.

seca

Precisión para la salud

seca 213:

El método confortable para medir la talla en cualquier sitio.

El estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requieren desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.



Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.


Consistente de varias piezas, el tallímetro desmontable del estadiómetro seca 213 se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared.

Su amplia y sólida placa de base permite usarlo donde se necesite.

El estadiómetro seca 213 se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de base. Con esta propiedad, el estadiómetro seca 213 es la herramienta ideal para todos los profesionales que necesitan usar tallímetros confiables en sitios que cambian con frecuencia.


Lectura precisa de los resultados de medición.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope para la cabeza. Otro detalle muy bien elaborado es la escala de fácil lectura: situada en el lateral del tallímetro, permite consultar la talla ya durante la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm.

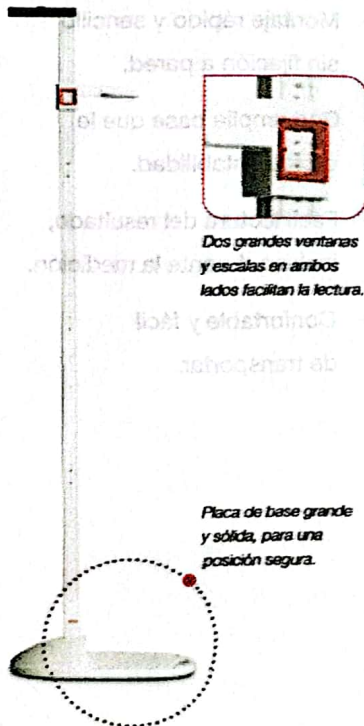


Dos grandes ventanas y escalas en ambos lados facilitan la lectura.

Placa de base grande y sólida, para una posición segura.

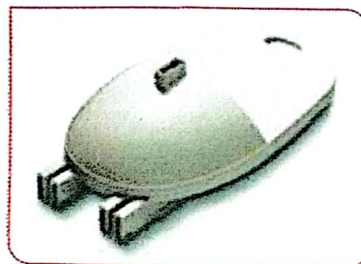

Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un transporte sencillo.

Bolsa seca 412 para un transporte más cómodo.

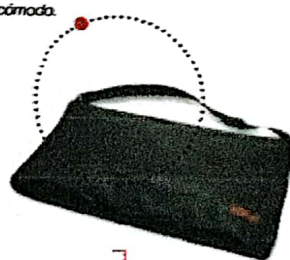

Confortable y fácil de transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque el tallímetro se puede desmontar en unos instantes, sino también por el asa incorporada que permite trasladar el estadiómetro seca 213 cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

seca 213

Datos técnicos

- Alcance de medición: 20–205 cm, 20–205 cm / 8–81"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolso de transporte seca 412

Health o meter®

Professional


Model 880KL Digital Floor Scale User Instructions

BEFORE USING SCALE

1. Remove the isolating tab from the battery compartment.
2. The 880KL default mode is pounds. To select a different weight unit, use a pen or stylus to slide the switch on the bottom of the scale to select the desired weight unit.
3. Position scale on a firm flat surface.

OPERATING YOUR SCALE

1. Tap scale with foot to initialize. Scale is initialized using vibration. Standing on top of the platform will not initialize the scale.
2. Scale is ready when "0.0" is displayed.
3. Step on scale platform and stand still for approximately 5 seconds to lock in the weight measurement.
4. Weight measurement will flash on screen. Step off the scale.
5. Screen will hold and display the last captured weight for 10 seconds and then scale will power off.

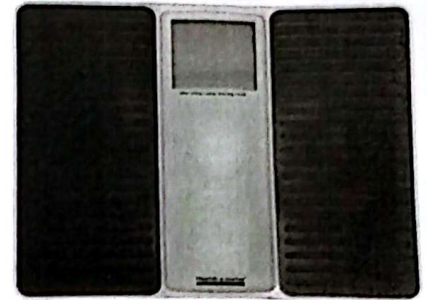

WARNING INDICATORS

- Lo** Replace battery
ERR Weight exceeds maximum capacity of 500lb / 220kg

ADVICE FOR USE AND CARE

- Placing your scale on a hard, even floor will ensure the greatest accuracy and consistency.
- Clean your scale with a damp cloth. Do not use chemical cleaning agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics.
- Treat your scale with care – it is a precision instrument. Do not drop it or jump on it. It is not shock proof.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience any difficulty in the use of your scale:

- Check to make sure the batteries are correctly fitted.
- Make sure the scale is on a flat, level floor and not touching a wall.
- When you use the scale, if there is no display at all or if "Lo" is displayed – try new batteries.
- For technical assistance, contact Customer Service at 1-800-815-6615.

CHANGING THE BATTERIES

- When the symbol "Lo" appears, the batteries need to be replaced.
- Use ONLY the recommended CR2032 3.0 V Lithium button type batteries. 2 batteries are required for use.
- Remove battery cover on the underside of the scale by pushing down on the tab and lifting the cover off of the unit.
- Make sure that the new batteries are inserted with the positive polarity up! Ensure that the batteries are securely fitted into place. Replace battery cover.
- Remove the batteries if the scale will not be used for extended periods of time.
- Batteries contain substances that may be harmful to the environment and human health.
- **WARNING:** Discard old batteries carefully, out of reach of young children. Swallowing a battery may be fatal. If a battery is swallowed, contact the hospital immediately to have it removed.



This symbol indicates that batteries should not be disposed of in the normal household waste but should be taken to an appropriate local recycling facility when one is available.

Never throw batteries in a fire or attempt to open outer casings, they may explode!

MADE IN HUNGARY

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover?

Health o meter® Professional scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alterations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A# _____

Return Department

9500 West 55th St.

McCook, IL 60525

If your scale is not covered by warranty, or has been damaged, an estimate of replacement costs will be provided to you for approval, prior to replacing.



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2017

**ISO13485:2003
CERTIFIED**

Health

Profesional

Modelo 880KL

Báscula digital de piso
Instrucciones del usuario

ANTES DE USAR LA BÁSCULA

1. Retire la pestaña aislante del compartimiento de la batería.
2. El modo predeterminado de la 880KL es libras. Para seleccionar una unidad de peso diferente, use un bolígrafo o lápiz óptico para deslizar el interruptor en la parte inferior de la báscula y seleccionar la unidad de peso deseada.
3. Coloque la báscula sobre una superficie plana y firme.

FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA

1. Toque la báscula con el pie para inicializarla. La báscula se inicializa mediante vibración. Pararse sobre la plataforma no inicializará la báscula.
2. La báscula está lista cuando se muestra "0.0".
3. Súbase a la plataforma de la báscula y permanezca quieto durante aproximadamente 5 segundos para fijar la medición del peso.
4. La medición del peso parpadeará en la pantalla. Bájese de la báscula.
5. La pantalla se mantendrá y mostrará el último peso capturado durante 10 segundos y luego la báscula se apagará.

INDICADORES DE ADVERTENCIA

Reemplace la batería

ERR El peso excede la capacidad máxima de 220 kg

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO

- Colocar la báscula sobre un suelo duro y uniforme garantizará la mayor precisión y consistencia.
- Limpie la báscula con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza químicos.
- No permita que la báscula se sature de agua, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos.
- Trate la báscula con cuidado: es un instrumento de precisión. No la deje caer ni salte sobre ella. No es a prueba de golpes.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta alguna dificultad al usar la báscula:

- Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas.
- Asegúrese de que la báscula esté sobre un suelo plano y nivelado, y que no toque la pared.
- Cuando utilice la báscula, si no aparece ninguna pantalla o si aparece "Lo", pruebe con pilas nuevas.
- Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al 1-800-815-6615.

CAMBIO DE LAS PILAS

- Cuando aparezca el símbolo "Lo", es necesario cambiar las pilas
- Utilice ÚNICAMENTE las pilas de botón de litio CR2032 de 3,0 V recomendadas. Se requieren 2 pilas para su uso.
- Retire la tapa de las pilas situada en la parte inferior de la báscula presionando la pestaña hacia abajo y levantando la tapa de la unidad.
- Asegúrese de que las pilas nuevas estén insertadas con la polaridad positiva hacia arriba. Asegúrese de que las pilas estén bien colocadas en su lugar. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
- Retire las pilas si la báscula no se va a utilizar durante periodos prolongados.
- Las pilas contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.
- ADVERTENCIA: Deseche las pilas viejas con cuidado, fuera del alcance de los niños pequeños. La ingestión de una pila puede ser mortal. Si se ingiere una pila, póngase en contacto con el hospital inmediatamente para que se la extraigan.



Este símbolo indica que las pilas no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a una instalación de reciclaje local adecuada cuando haya una disponible.
Nunca arroje las pilas al fuego ni intente abrir las carcasas exteriores, ya que pueden explotar.

HECHO EN HUNGRÍA

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía?

Las básculas Health o meter Professional tienen garantía desde la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un período de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, devuélvalo con el flete prepagado y embalado adecuadamente a Pelstar, LLC (consulte "Para obtener el servicio de garantía" a continuación para obtener instrucciones). Si el fabricante determina que existe un defecto de material o mano de obra, la única solución del cliente será el reemplazo de la báscula sin cargo. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se puede reemplazar con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las piezas reemplazadas están cubiertas solo por el período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Conserve su factura o recibo. Los distribuidores o tiendas minoristas de Pelstar que vendan productos Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué está excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes factores: uso negligente o indebido del producto, uso con voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, abuso, incluida la manipulación, daños durante el transporte o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un país a otro, de un estado a otro, de una provincia a otra o de una jurisdicción a otra.

Para obtener el servicio de garantía, asegúrese de conservar su recibo de compra o documento que muestre el comprobante de compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), que debe incluirse en la etiqueta de devolución. Adjunte el comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número de teléfono diurno y descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con el envío y el seguro prepagados a:

Pelstar, LLC

Atención R/A# _____

Departamento de Devoluciones

9500 West 55th St.

McCook, IL 60525

Si su báscula no está cubierta por la garantía o ha sido dañada, se le proporcionará un estimado de los costos de reemplazo para su aprobación antes de reemplazarla.



PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525, EE. UU.

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc., utilizada bajo licencia. Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados y propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2017

CERTIFICADO
ISO13485:2003

P/N UM880KL REV20170329

2