
MEDICOLSA

FICHA TÉCNICA

LÍNEA DEL PRODUCTO	Medico Quirurgico
PRODUCTO	TALLIMETRO ESTADIOMETRO PORTATIL USO ADULTO
REFERENCIA	AVA-312
	01006423
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD
REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
MARCA / FABRICANTE	AVANUTRI
PAÍS PROCEDENCIA	

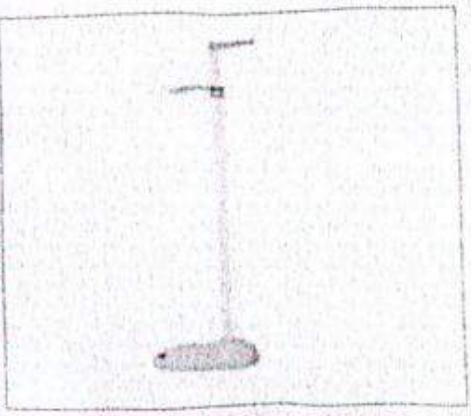

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USO DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

• TALLIMETRO PORTÁTIL DE USO ADULTO DISTINGUIDO POR EL AMPLIO TAMAÑO DE SU BASE CON UN DISEÑO MODERNO DE ESQUINAS REDONDEADAS. • CUENTA CON UN INDICADOR DE LECTURA DE GRAN TAMAÑO PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LA ALTURA. • SISTEMA DE REGLA DE MEDICIÓN CON SISTEMA DE AJUSTE PRECISO Y SUAVE. • EXCLUSIVO ESTABILIZADOR DE REGLA CON DISEÑO EN "T" CON AJUSTE DE DISTANCIA QUE PROPORCIONA ESTABILIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DEL EQUIPO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • BASE GRANDE (23,5 X 13,5 CM) DE DISEÑO MODERNO CON ESQUINAS REDONDEADAS. • RANGO DE MEDICA: 20 – 210 CM • MATERIAL: ABS • PESO: 3,2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0

ACCESORIOS

0

INSTRUCCIONES DE USO

DATOS TEMPERATURA

RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA

RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO


DATOS ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES ADICIONALES


VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO

■ WARNING INDICATIONS


OVERLOAD INDICATION
Scale overload. (max. weight capacity is indicated on the scale)
Please step off to avoid damage.

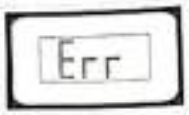

LOW BATTERY INDICATION
Battery power is low. Please install new battery.

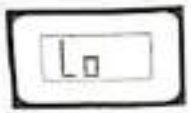

RE-TEST
Display "[" when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.

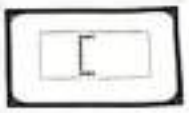

⚠ ADVISE FOR USE & CARE

1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry!
   Keep the scale in cool place with dry air.
2. Keep standing still during the course of weighing. DO NOT strike, shock or drop the scale.
3. Treat the scale with care as it is a precise instrument. Always keep your scale in horizontal position.
4. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive cleaning agents.
5. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
6. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
7. Do not use it for commercial purpose.

1768-036E RO

Electronic Personal Scale

Instructions for use

CE

EB-36 SERIES

Scanned with CamScanner


■ TO REPLACE BATTERY



4x1.5V (AAA)batteries.

If you want to replace the batteries,
A.Open the battery cover at the bottom of scale;
B.Take out the used batteries;
C.Install new battery by putting one side of the battery, and then pressing down the other side.
Please take note to the polarity.

■ LED DISPLAY

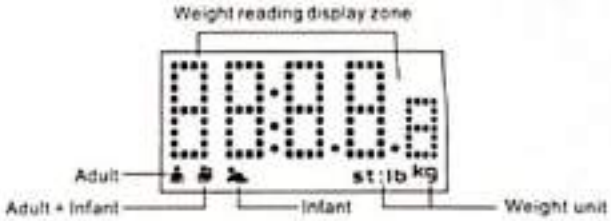

Remind that Adult should step on the scale, and what the LED shows is the weight for Adult.

Remind that Adult should step on the scale with infant.

Remind that what the LED shows is the weight for infant.

Remark: The above three icons will be only available under the Infant Mode.

■ BUTTON FUNCTION



Button at the bottom of scale

When the scale is turned on:
1. Press for a while: Convert the mode between Adult Mode and Infant Mode
2. Press shortly : Convert the weight unit among kg / lb /st

Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

■ OPERATION

1. Adult Mode - For Adult weighing



Step 1: To make sure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet or soft surface.




Step 2: Adult steps on the scale gently, the scale will be on automatically. Stand for a while and wait until the LED shows the weight reading. The reading will flash three times and locked (as shown like the picture).

2. Infant Mode - Weighing adult and infant respectively



Step 1: To make sure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet or soft surface.

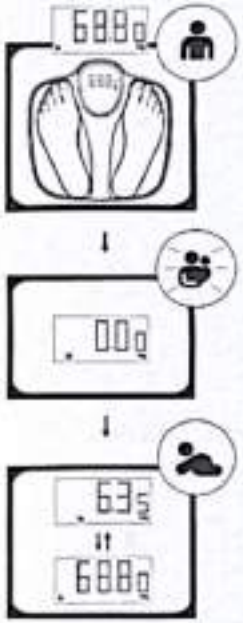

Step 2: Adult steps on the scale gently, the scale will be on automatically. Stand for a while and wait until the LED shows the weight reading. Once the reading is stable, the LED will show Zero, then the "Adult+Infant" icon will flash (as shown like the picture)

Step 3: Adult steps off the scale and steps on again with infant. Stand for a while and wait until the LED shows the weight of infant. The LED will show the weight of adult and infant respectively for three times.

Remark: the scale will be off automatically within seconds if there is no any operation.

Scanned with CamScanner


BADECOL



www.badecol.com | Básculas Badecol


LÍNEA MÉDICA

BÁSCULA PESA PERSONA EB 7010

Badecol facilita el día a día de los usuarios, ofreciéndoles equipos de pesaje de la línea electrónica que puede ser usada en diferentes ámbitos como consultorios, hospitales, centros esteticos y gimnasios; por su modelo, capacidad y facilidad de manejo.





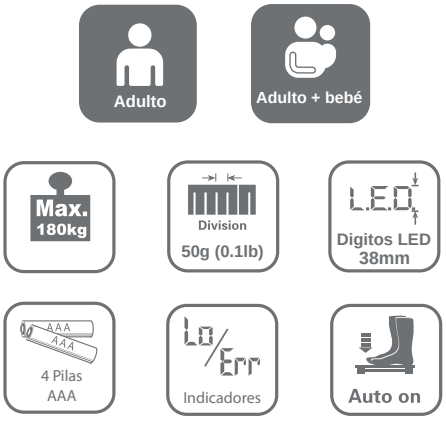

Referencia:	EB 7010
Marca:	Badecol
Division:	50 Gr
Mecanismo:	Electrónico
Capacidad Maxima:	180 Kg
Fuente de alimentación:	4 Pilas AAA
Display:	Digitos LED 38mm
Material:	Plástico de alta resistencia
Dimensiones:	34 x 34 x 2,8 cm

www.badecol.com
Calle 23 # 17D - 43
ventas@badecol.com
Tel. (57+2) 880 07 61 / (57+2) 880 97 04
Cel. 315 492 7497 / 318 242 2423
Cali - Colombia

BADECOL
Balanzas de Colombia

20 AÑOS