# FICHA TÉCNICA

# Tallimetro estadiometro adulto Avanutri ava-312



## DESCRIPCIÓN


- Tallímetro portátil de uso adulto distinguido por el amplio tamaño de su base con un diseño moderno de esquinas redondeadas. • cuenta con un indicador de lectura de gran tamaño para una mejor visualización de la altura. • sistema de regla de medición con sistema de ajuste preciso y suave. • exclusivo estabilizador de regla con diseño en "t" con ajuste de distancia que proporciona estabilización vertical y horizontal del equipo. Especificaciones técnicas: • base grande (23,5 x 13,5 cm) de diseño moderno con esquinas redondeadas. • rango de medica: 20 – 210 cm • material: ABS • peso: 3,2 kg

Contacto: 512 05 65 - 311 610 92 31 – 316 722 05 90
Email: contacto@biometro.com.co; comercial@biometro.com.co; logistica@biometro.com.co
**BIO - METRO S.A.S. "Metrología & Calidad" Carrera 49 Nro. 49-48 Oficina 704 Oficina 704**
**Medellín - Antioquia**
**www.biometro.com.co**


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;

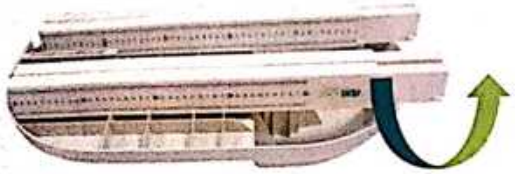

2- Retire todas las piezas;

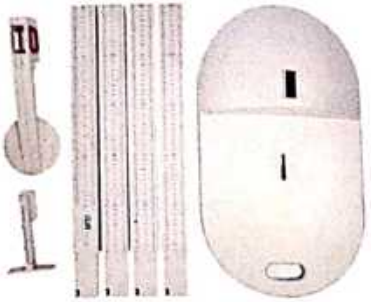


3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;

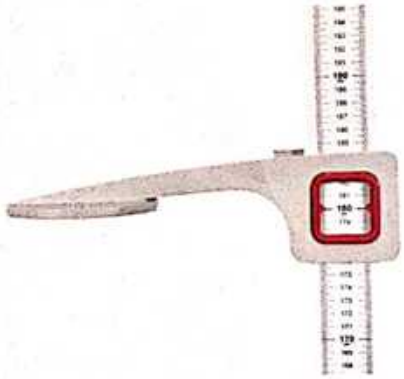

5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:

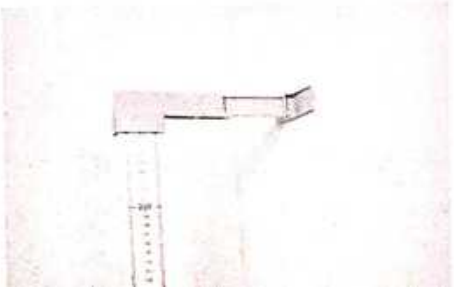


5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;

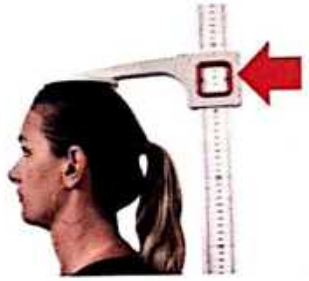


# INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hacia que esté trabada:

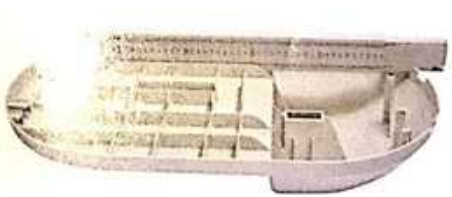




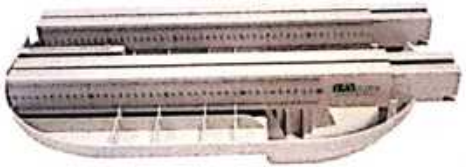

Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:

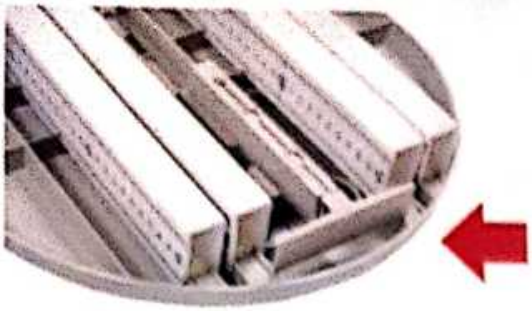

# CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.

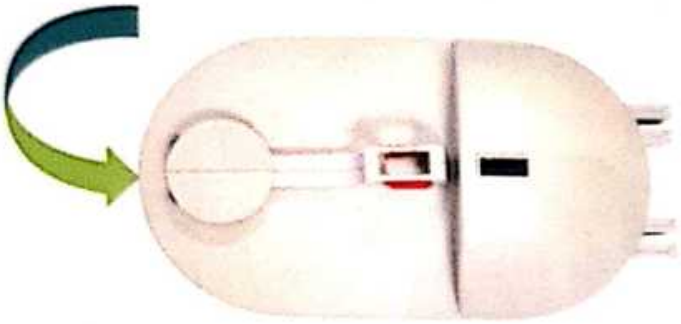

**INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN**
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

**GARANTÍA:**
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner

# Balanza Digital de Piso

**800KL**

Health o meter® Professional

**Gran pantalla LCD de 38 mm / 1 1/2”**




## Ventajas

- **Pantalla de LCD de 38 mm / 1 1/2”**
  La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- **Balanza de piso de 180 kg / 397 lb de capacidad**
  La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- **Tiempo de pesaje de 5 segundos**
  La información del peso se mostrará por 5 segundos después de bajarse de la balanza para que el usuario o el paciente se estabilice

Health o meter® Professional
www.homscales.com



*Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales*

# Balanza Digital de Piso

**800KL**

Health o meter® Professional




Estuche de Transporte para 800KL n.° de artículo 64771




| Modelo | Empaque principal | Dimensiones de envío | Peso (KG) | Código CUP |
|---|---|---|---|---|
| 800KL | 4 | 365.13 mm x 381 mm x 222.25 mm | 8.28 kg | 892076002109 |

## Especificacións

- Capacidad: 180 kg / 397 lb
- Resolución: 0.1 kg / 0.2 lb
- Pantalla: LCD de 38.1 mm /1 ½”
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 311 mm (ancho) x 311 mm (prof.) x 29 mm (alto) / 12 ¼″ (ancho) x 12 ¼″ (prof.) x 1 1⁄8″ (alto)
- Fuente de alimentación: 1 batería de litio de 3 voltios (incluida)
- Estuche opcional n.° de artículo 64771

**Balanzas Health o meter® Professional**
**9500 West 55th Street**
**McCook, IL 60525 EE. UU.**
**Teléfono: 1 (708)-377-0600**
**Fax: 1 (708)-377-0601**

Health o meter® Professional
www.homscales.com